



Évaluation d'un antibiogramme direct sur hémoculture en moins de 8h par méthode en diffusion sur Mueller-Hinton rapide

James Kasprzak

► To cite this version:

James Kasprzak. Évaluation d'un antibiogramme direct sur hémoculture en moins de 8h par méthode en diffusion sur Mueller-Hinton rapide. Sciences pharmaceutiques. 2020. dumas-02887630

HAL Id: dumas-02887630

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02887630>

Submitted on 2 Jul 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

MÉMOIRE
DU DIPLÔME D'ÉTUDES SPECIALISÉES
DE BIOLOGIE MÉDICALE

Soutenu le jeudi 25 juin 2020

Par M. James KASPRZAK
Né(e) le 22 juin 1992 à Paris

Conformément aux dispositions du décret n°2003-76
du 23 janvier 2003, tenant lieu de

THÈSE
POUR LE DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN
PHARMACIE

----oOo----

Thèse Article

**ÉVALUATION D'UN ANTIBIOGRAMME DIRECT
SUR HÉMOCULTURE EN MOINS DE 8H PAR
MÉTHODE EN DIFFUSION SUR MUELLER-HINTON
RAPIDE**

----oOo----

JURY :

Président : Monsieur le Professeur Philippe Colson

Membres : Monsieur le Professeur Raymond Ruimy
Madame le Docteur Alice Gaudart
Monsieur le Docteur Romain Lotte

27 Boulevard Jean Moulin – 13385 MARSEILLE Cedex 05
Tel. : 04 91 83 55 00 – Fax : 04 91 80 26 12

ADMINISTRATION :

<i>Doyen :</i>	Mme Françoise DIGNAT-GEORGE
<i>Vice-Doyens :</i>	M. Jean-Paul BORG, M. François DEVRED, M. Pascal RATHELOT
<i>Chargés de Mission :</i>	Mme Pascale BARBIER, M. David BERGE-LEFRANC, Mme Manon CARRE, Mme Caroline DUCROS, Mme Frédérique GRIMALDI
<i>Conseiller du Doyen :</i>	M. Patrice VANELLE
<i>Doyens honoraires :</i>	M. Jacques REYNAUD, M. Pierre TIMON-DAVID, M. Patrice VANELLE
<i>Professeurs émérites :</i>	M. José SAMPOL, M. Athanassios ILIADIS, M. Jean-Pierre REYNIER, M. Henri PORTUGAL
<i>Professeurs honoraires :</i>	M. Guy BALANSARD, M. Yves BARRA, Mme Claudette BRIAND, M. Jacques CATALIN, Mme Andrée CREMIEUX, M. Aimé CREVAT, M. Bernard CRISTAU, M. Gérard DUMENIL, M. Alain DURAND, Mme Danielle GARÇON, M. Maurice JALFRE, M. Joseph JOACHIM, M. Maurice LANZA, M. José MALDONADO, M. Patrick REGLI, M. Jean-Claude SARI
<i>Chef des Services Administratifs :</i>	Mme Florence GAUREL
<i>Chef de Cabinet :</i>	Mme Aurélie BELENGUER
<i>Responsable de la Scolarité :</i>	Mme Nathalie BESNARD

DEPARTEMENT BIO-INGENIERIE PHARMACEUTIQUE

Responsable : Professeur Philippe PICCERELLE

PROFESSEURS

BIOPHYSIQUE	M. Vincent PEYROT M. Hervé KOVACIC
GENIE GENETIQUE ET BIOINGENIERIE	M. Christophe DUBOIS
PHARMACIE GALENIQUE, PHARMACOTECHNIE INDUSTRIELLE, BIOPHARMACIE ET COSMETIQUE	M. Philippe PICCERELLE

MAITRES DE CONFERENCES

BIOPHYSIQUE

M. Robert GILLI
Mme Odile RIMET-GASPARINI
Mme Pascale BARBIER
M. François DEVRED
Mme Manon CARRE
M. Gilles BREUZARD
Mme Alessandra PAGANO

GENIE GENETIQUE ET BIOTECHNOLOGIE

M. Eric SEREE-PACHA
Mme Véronique REY-BOURGAREL

PHARMACIE GALENIQUE, PHARMACOTECHNIE INDUSTRIELLE,
BIOPHARMACIE ET COSMETOLOGIE

M. Pascal PRINDERRE
M. Emmanuel CAUTURE
Mme Véronique ANDRIEU
Mme Marie-Pierre SAVELLI

NUTRITION ET DIETETIQUE

M. Léopold TCHIAKPE

A.H.U.

THERAPIE CELLULAIRE

M. Jérémy MAGALON

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS

ANGLAIS

Mme Angélique GOODWIN

DEPARTEMENT BIOLOGIE PHARMACEUTIQUE

Responsable : Professeur Philippe CHARPIOT

PROFESSEURS

BIOCHIMIE FONDAMENTALE, MOLECULAIRE ET CLINIQUE

M. Philippe CHARPIOT

BIOLOGIE CELLULAIRE

M. Jean-Paul BORG

HEMATOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

Mme Françoise DIGNAT-GEORGE
Mme Laurence CAMOIN-JAU
Mme Florence SABATIER-MALATERRE
Mme Nathalie BARDIN

MICROBIOLOGIE

M. Jean-Marc ROLAIN
M. Philippe COLSON

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE MEDICALE, HYGIENE ET
ZOOLOGIE

Mme Nadine AZAS-KREDER

MAITRES DE CONFERENCES

BIOCHIMIE FONDAMENTALE, MOLECULAIRE ET CLINIQUE

Mme Dominique JOURDHEUIL-RAHMANI
M. Thierry AUGIER
M. Edouard LAMY
Mme Alexandrine BERTAUD
Mme Claire CERINI
Mme Edwige TELLIER
M. Stéphane POITEVIN

HEMATOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

Mme Aurélie LEROYER
M. Romaric LACROIX
Mme Sylvie COINTE

MICROBIOLOGIE

Mme Michèle LAGET
M. Michel DE MEO
Mme Anne DAVIN-REGLI
Mme Véronique ROUX
M. Fadi BITTAR
Mme Isabelle PAGNIER
Mme Sophie EDOUARD
M. Seydina Mouhamadou DIENE

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE MEDICALE, HYGIENE ET ZOOLOGIE

Mme Carole DI GIORGIO
M. Aurélien DUMETRE
Mme Magali CASANOVA
Mme Anita COHEN

BIOLOGIE CELLULAIRE

Mme Anne-Catherine LOUHMEAU

A.H.U.

HEMATOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

M. Maxime LOYENS

DEPARTEMENT CHIMIE PHARMACEUTIQUE

Responsable : Professeur Patrice VANELLE

PROFESSEURS

CHIMIE ANALYTIQUE, QUALITOLOGIE ET NUTRITION

Mme Catherine BADENS

CHIMIE PHYSIQUE – PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES

M. Philippe GALLICE

CHIMIE MINERALE ET STRUCTURALE –
CHIMIE THERAPEUTIQUE

M. Pascal RATHELOT
M. Maxime CROZET

CHIMIE ORGANIQUE PHARMACEUTIQUE

M. Patrice VANELLE
M. Thierry TERME

PHARMACOGNOSIE, ETHNOPHARMACOLOGIE, HOMEOPATHIE

Mme Evelyne OLLIVIER

MAITRES DE CONFERENCES

BOTANIQUE ET CRYPTOLOGIE, BIOLOGIE CELLULAIRE	Mme Anne FAVEL Mme Joëlle MOULIN-TRAFFORT
CHIMIE ANALYTIQUE, QUALITOLOGIE ET NUTRITION	Mme Catherine DEFOORT M. Alain NICOLAY Mme Estelle WOLFF Mme Elise LOMBARD Mme Camille DESGROUAS
CHIMIE PHYSIQUE – PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES	M. David BERGE-LEFRANC M. Pierre REBOUILLON
CHIMIE THERAPEUTIQUE	Mme Sandrine FRANCO-ALIBERT Mme Caroline DUCROS M. Marc MONTANA Mme Manon ROCHE
CHIMIE ORGANIQUE PHARMACEUTIQUE HYDROLOGIE	M. Armand GELLIS M. Christophe CURTI Mme Julie BROGGI M. Nicolas PRIMAS M. Cédric SPITZ M. Sébastien REDON
PHARMACOGNOSIE, ETHNOPHARMACOLOGIE, HOMEOPATHIE	M. Riad ELIAS Mme Valérie MAHIOU-LEDDER Mme Sok Siya BUN Mme Béatrice BAGHDIKIAN

MAITRES DE CONFERENCE ASSOCIES A TEMPS PARTIEL (M.A.S.T.)

CHIMIE ANALYTIQUE, QUALITOLOGIE ET NUTRITION	Mme Anne-Marie PENET-LOREC
CHIMIE PHYSIQUE – PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES	M. Cyril PUJOL
DROIT ET ECONOMIE DE LA PHARMACIE	M. Marc LAMBERT
GESTION PHARMACEUTIQUE, PHARMACOECONOMIE ET ETHIQUE PHARMACEUTIQUE OFFICINALE, DROIT ET COMMUNICATION PHARMACEUTIQUES A L'OFFICINE ET GESTION DE LA PHARMAFAC	Mme Félicia FERRERA

A.H.U.

CHIMIE ANALYTIQUE, QUALITOLOGIE ET NUTRITION	M. Mathieu CERINO
--	-------------------

ATER

CHIMIE ANALYTIQUE	M. Charles DESMACHELIER
CHIMIE THERAPEUTIQUE	Mme Fanny MATHIAS

DEPARTEMENT MEDICAMENT ET SECURITE SANITAIRE

Responsable : Professeur Benjamin GUILLET

PROFESSEURS

PHARMACIE CLINIQUE	Mme Diane BRAGUER M. Stéphane HONORÉ
PHARMACODYNAMIE	M. Benjamin GUILLET
TOXICOLOGIE GENERALE	M. Bruno LACARELLE
TOXICOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT	Mme Frédérique GRIMALDI

MAITRES DE CONFERENCES

PHARMACODYNAMIE	M. Guillaume HACHE Mme Ahlem BOUHLEL M. Philippe GARRIGUE
PHYSIOLOGIE	Mme Sylviane LORTET Mme Emmanuelle MANOS-SAMPOL
TOXICOCINETIQUE ET PHARMACOCINETIQUE	M. Joseph CICCOLINI Mme Raphaëlle FANCIULLINO Mme Florence GATTACECCA
TOXICOLOGIE GENERALE ET PHARMACIE CLINIQUE	M. Pierre-Henri VILLARD Mme Caroline SOLAS-CHESNEAU Mme Marie-Anne ESTEVE

A.H.U.

PHARMACIE CLINIQUE	M. Florian CORREARD
PHARMACOCINETIQUE	Mme Nadège NEANT

CHARGES D'ENSEIGNEMENT A LA FACULTE

Mme Valérie AMIRAT-COMBRALIER, Pharmacien-Praticien hospitalier

M. Pierre BERTAULT-PERES, Pharmacien-Praticien hospitalier

Mme Marie-Hélène BERTOCCHIO, Pharmacien-Praticien hospitalier

Mme Martine BUES-CHARBIT, Pharmacien-Praticien hospitalier

M. Nicolas COSTE, Pharmacien-Praticien hospitalier

Mme Sophie GENSOLLEN, Pharmacien-Praticien hospitalier

M. Sylvain GONNET, Pharmacien titulaire

Mme Florence LEANDRO, Pharmacien adjoint

M. Stéphane PICHON, Pharmacien titulaire

M. Patrick REGGIO, Pharmacien conseil, DRSM de l'Assurance Maladie

Mme Clémence TABELLE, Pharmacien-Praticien attaché

Mme TONNEAU-PFUG, Pharmacien adjoint

M. Badr Eddine TEHHANI, Pharmacien – Praticien hospitalier

M. Joël VELLOZZI, Expert-Comptable

Mise à jour le 22 février 2018

REMERCIEMENTS

À Monsieur le Professeur Philippe Colson,

Je vous remercie de me faire l'honneur de présider ce jury de thèse. La passion qui vous anime dans vos projets de recherche m'a toujours inspiré lors de mon passage au sein de l'IHU. J'espère comme vous arriver à déployer autant d'énergie dans les projets qui constitueront ma vie. Je vous prie de trouver ici Monsieur, le témoignage de mon profond respect.

À Monsieur le Professeur Raymond Ruimy,

Merci de m'avoir fait l'honneur de diriger cette thèse. Vous m'avez porté durant toute la démarche grâce à vos précieux conseils et votre savoir et je vous en suis très reconnaissant. Mes semestres au sein de votre service m'ont énormément appris sur cette discipline exigeante qu'est la bactériologie et j'espère pouvoir l'exercer avec votre rigueur. Soyez assuré de mon grand respect.

À Madame le Docteur Alice Gaudart,

Merci de me faire l'honneur de juger ce travail de thèse. Ton écoute et tes conseils m'ont beaucoup aidé durant ce travail de thèse et je t'en suis très reconnaissant. Sois assurée de mon profond respect

À Monsieur le Docteur Romain Lotte

Je te remercie de me faire l'honneur de participer à ce jury de thèse. Ce geste me touche particulièrement dû au fait que cette thèse tombe en plein pendant ta préparation au CNU. Sois assuré de mon profond respect.

À ma famille,

Qui est un pilier pour moi. Mes réussites ne sont que le reflet de vos valeurs et de votre dévouement.

À ma femme, Anne-Sophie Kasprzak

Sans qui rien n'aurait été possible. Mon bonheur dépend du tiens et tu réalises actuellement la plus belle chose au monde, me donner une petite fille.

À ma belle-famille,

Que je considère comme ma famille et qui m'a considérablement soutenu et appris durant toutes ces années.

À mes amis

« L'Université n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. »

Table des matières :

Partie I : Contexte du travail.....	12
Partie II : Introduction de l'étude.....	16
Partie III : Matériels et méthodes.....	19
Partie IV : Résultats.....	25
Partie V : Discussion.....	33
Partie VI : Conclusion et perspectives.....	37
Partie VII : Conclusion générale.....	39
Partie VIII : Article.....	42
Partie IX : Bibliographie.....	65
Partie X : Serment de Galien.....	68

Liste des abréviations par ordre alphabétique

BSAC : British Society for Antimicrobial Chemotherapy

BLSE : bêta-lactamases à spectre élargi

CA-SFM : Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie

CHU : Centre Hospitalo-Universitaire

CMI : Concentration minimal inhibitrice

EUCAST : European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

IV : intraveineux

JO : Jours 0

MALDI-TOF: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight

MH : Mueller-Hinton

MHR : Mueller-Hinton Rapid

ME : Erreur majeure

Me : Erreur mineure

mL : millilitre

mm : millimètre

PCR : Polymerase Chain Reaction

VME : Very Major Error

SIL : Système d'informatisation du laboratoire

24/7 : 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Partie I : Contexte du travail

L'hémoculture est une analyse bactériologique prescrite dans un contexte de suspicion de bactériémie, de sepsis ou choc septique, de fièvre d'origine indéterminée, de suspicion de bactériémie et/ou d'infection liée au cathéter ou enfin de suspicion d'endocardite ou de fongémie.

Les flacons d'hémoculture sont incubés dans un automate qui va assurer l'agitation et la détection de la pousse microbienne. Les micro-organismes présents dans le flacon d'hémoculture vont produire du CO₂ en se développant. Ce CO₂ va entraîner une diminution du pH qui va modifier la couleur d'un sensor de silicone présent au fond du flacon d'hémoculture, cette modification de couleur sera détectée par l'automate.

Au total, 60 000 à 70 000 flacons sont annuellement incubés au laboratoire de bactériologie du CHU de Nice (49% des analyses pris en charge au laboratoire). Le nombre annuel d'épisodes ayant nécessité le prélèvement d'hémocultures est d'environ 18000 à 20000 patients. Le taux de positivité est de 10% (données 2013 à 2018). Mensuellement, près de 200 patients présentent un ou plusieurs flacons positifs au CHU de Nice.

Jusqu'en 2017, le CHU de Nice ne possédait pas de laboratoire de microbiologie ouvert 24/7, les flacons d'hémoculture n'étaient donc pas pris en charge la nuit avec pour conséquence un retard diagnostic et un risque de flacons faussement négatifs¹.

Le sepsis est un problème de santé public majeur avec un coût estimé à 20 milliards de dollars, soit 5,2% du coût total des hôpitaux², et se classe en première position des affections les plus coûteuses à traiter. Le coût moyen par patient hospitalisé est de \$22 100 avec une mortalité estimée à 10% chez les enfants et 38,4% chez les personnes âgées³. L'incidence des sepsis est estimée entre 300 et 1000/100 000 habitants⁴ et elle augmente en raison du vieillissement de la population^{5,6} et du meilleur diagnostic⁷.

Le retard dans l'administration des antibiotiques entraîne une augmentation des risques de mortalité hospitalière⁸. Pour chaque heure de retard la mortalité augmente de 0,4% pour le sepsis ($p=0,02$) et 1,8% pour le choc septique ($p=0,001$)⁹.

Une politique de réponse rapide est menée depuis 2017 au sein du service de microbiologie. Cette politique a mené à la mise en place d'une ouverture 24/7 permettant l'incubation en continu des hémocultures et le traitement immédiat lorsqu'elles sont positives.

Une étude a été menée sur l'ouverture 24/7 et a permis de montrer une réduction du délai pour obtenir une antibiothérapie efficace de 10.4h¹⁰.

Toujours dans ce but de réponse rapide, l'intégration du Maldi-Tof a permis d'obtenir une identification de 80% des bactéries en direct depuis le flacon d'hémoculture et 96% des entérobactéries¹¹ dans un délai de 10 minutes. Une première adaptation de l'antibiothérapie probabiliste peut donc se faire sur les résultats obtenus grâce au Maldi-Tof.

Un protocole d'antibiothérapie probabiliste a été rédigé par le laboratoire en accord avec le service d'infectiologie pour adapter au mieux l'antibiothérapie probabiliste aux caractéristiques microbiologiques. Pour les entérobactéries du groupe 1-2 (*Escherichia coli*, *Salmonella* sp, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter koseri*, *Klebsiella pneumoniae*) l'utilisation de la céfotaxime IV est conseillée sauf en cas de contexte nosocomial où nous recommandons la Piperacilline/tazobactam IV. Si le patient présente des antécédents de BLSE ou des facteurs de risque de BLSE l'imipénem/Cilastatine IV est utilisée.

Pour les entérobactéries du groupe 3 (*Citrobacter freundii*, *Enterobacter* sp, *Morganella morganii*, *Hafnia alvei*, *Serratia marcescens*, *Providencia* sp, *Pantoea agglomerans*) l'utilisation de la céfépime IV est conseillée. Si le patient présente des antécédents de BLSE ou facteurs de risque de BLSE l'imipénem/Cilastatine IV est utilisée. Si des facteurs de gravité sont présents l'amikacine est ajoutée.

Ces évolutions ont considérablement amélioré le diagnostic des bactériémies.

Enfin nous avons amélioré le délai d'obtention des résultats de l'antibiogramme en faisant un antibiogramme en direct depuis un flacon d'hémoculture sur des milieux mueller-hinton avec un résultat obtenu en 16 à 24 heures. Les diamètres sont lus en fonction des recommandations de l'EUCAST/CA-SFM.

Cette organisation est complétée par la transmission tous les matins d'un listing des patients pour lesquels un flacon d'hémoculture s'est positif dans la nuit (fichier Excel provenant d'une extraction du SIL adressée par mail aux biologistes par l'interne de garde) avec un staff médical (biologistes, internes) bi-hebdomadaire (vendredi, lundi) visant à assurer la continuité du service (analytique, post-analytique).

Nous souhaitons maintenant raccourcir le délai d'incubation des antibiogrammes (qui est actuellement de 16 heures), cela serait permis par le milieu MHR-SIR. Ce milieu commercialisé permet une lecture de l'antibiogramme au bout de 6 à 8 heures.

On m'a confié la mission d'évaluer les performances du MHR en fonction des recommandations d'inoculum proposées par la BSAC et le CA-SFM et de comparer les résultats MHR/MH obtenus sur des flacons d'hémocultures positives. J'ai ensuite estimé la réduction du délai de rendu des antibiogrammes directement faits à partir d'un flacon d'hémoculture au sein du CHU de Nice.

Partie II : Introduction de l'étude

Le sepsis est un problème de santé publique majeur en raison d'une mortalité élevée estimée à 10% chez les enfants et 38.4% chez les personnes âgées³. L'augmentation de la mortalité chez les patients en sepsis est due à un retard d'administration des antibiotiques⁸, une antibiothérapie inadaptée^{12,13} ou à la présence de résistances bactériennes comme des BLSE¹⁴. La bactérie responsable du sepsis peut être mise en évidence par la réalisation d'hémocultures. Les résultats de sensibilité (antibiogramme) permettent d'adapter l'antibiothérapie. Un rendu d'antibiogramme plus rapide est associé à une meilleure évolution clinique des patients en sepsis¹⁵. Actuellement à partir d'un flacon positif les résultats de l'antibiogramme sont obtenus en 16 à 24 heures. Les bactéries majoritairement impliquées dans le sepsis sont les entérobactéries et *Staphylococcus aureus*¹⁶.

Ces dernières années, les laboratoires de bactériologie ont amélioré la prise en charge des flacons d'hémocultures. Dans un premier temps ils ont élargi leur plage de travail 24/7¹⁰ afin d'incuber en continu les flacons d'hémocultures dans les automates. Cependant la lecture et la validation des antibiogrammes demeurent des activités réalisées entre 8h30 et 17h.

Dans un deuxième temps, l'utilisation de la protéomique avec la spectrométrie de masse (Maldi-tof) a permis d'obtenir une identification en direct depuis le flacon d'hémoculture positif dans un délai de 10 minutes à 1 heures ou après une pré-culture de 4 heures¹⁷. Dans notre laboratoire la méthode (lyse + lavage) permet une identification de 80% des bactéries (96% des entérobactéries) dans un délai de 10 minutes¹¹. Une première adaptation de l'antibiothérapie probabiliste peut donc se faire à partir de ces résultats. Cette identification en direct permet d'éviter l'étape de subculture qui nécessite un délai supplémentaire de 24 heures¹⁸.

Plusieurs méthodes moléculaires ont été développées et utilisées pour détecter directement sur des flacons d'hémocultures positifs les résistances bactériennes. Par exemple la détection de la résistance à la méticilline chez les *S. aureus* par Xpert MRSA/SA (Cepheid, Sunnyvale, CA) est utilisée pour les flacons d'hémocultures positifs à cocci gram positif en amas afin d'adapter le traitement. La résistance chez les entérobactéries peut être également détectée par des tests moléculaires ciblant plusieurs gènes de résistances¹⁹. Ces techniques ont comme inconvénient d'avoir un surcoût important et des études médico-économiques sont actuellement en cours afin de définir la place de ces tests dans la stratégie diagnostique. Par ailleurs ces techniques ne permettent pas de détecter les céphalosporinases hyperproduites¹⁷.

Les méthodes phénotypiques restent pour l'instant le gold standard permettant de tester la sensibilité de la bactérie à un large panel d'antibiotiques. Cependant le résultat de l'antibiogramme à partir d'un flacon positif nécessite un délai de 16 à 24 heures.

Récemment une méthode de rendu rapide des antibiogrammes par diffusion sur un milieu de culture a été développée. Cette méthode utilise un milieu particulier contenant des adjuvants dans la gélose associée à une lecture précoce des diamètres par une caméra (SIR-scan). Ce milieu Mueller-Hinton Rapid-SIR (MHR-SIR) vient d'être évalué et il permettrait un gain de 17 heures sur le rendu de l'antibiogramme²⁰. Cependant dans l'étude de Pilmis et *al.* 2019, il n'y a pas eu d'évaluation des performances du milieu MHR et d'étude comparative du milieu MHR par rapport au milieu MH sur des flacons d'hémoculture positifs. De plus, elle a été réalisée sur les entérobactéries et le *S. aureus* avec un antibiogramme réalisé en direct depuis des flacons d'hémoculture positifs en suivant les recommandations d'inoculum de la British society for antimicrobial chemotherapy²¹. L'utilisation de la PCR à la recherche du gène *mecA* par la majorité des laboratoires limite l'utilisation d'un milieu MHR pour les *S. aureus*. Cette étude n'indique pas si la validation des antibiogrammes est effectuée de 8h30 à 18h30.

Par ailleurs depuis 2018, les laboratoires français de microbiologie suivent les recommandations d'inoculum du CA-SFM pour la réalisation d'un antibiogramme en direct depuis un flacon d'hémoculture positif. Ces recommandations sont différentes de celle utilisées dans le travail précédemment publié²⁰.

Les objectifs de notre travail sont : (i) évaluer les performances (répétabilité et reproductibilité) du MHR selon les recommandations d'inoculum proposées par la BSAC et le CA-SFM, (ii) de comparer les résultats MHR/MH obtenus sur des flacons d'hémocultures positives à entérobactéries de patients en sepsis, (iii) estimer la réduction du délai de rendu des antibiogrammes d'entérobactéries directement réalisés à partir d'un flacon d'hémoculture au sein de notre laboratoire où la lecture des antibiogrammes est effectuée de 8h30 à 17h00.

Partie III : Matériels et méthodes

Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de Bactériologie du centre Hospitalo-universitaire de Nice. Cet établissement prend en charge des adultes et des enfants avec une capacité de 1667 lits. Le laboratoire traite annuellement 65 000 flacons d'hémoculture et cette activité représente 49% des analyses prises en charges. Notre laboratoire assure une permanence d'activité 24/7 pour la prise en charge des prélèvements. Toutes les hémocultures prélevées sont incubées dans un automate (BacT/ALERT® 3D automated device (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France)) jusqu'à détection de la positivité. Les hémocultures positives bénéficient d'une coloration de Gram (PREVI® Color automated Gram staining system (bioMérieux)), une identification en direct sur les flacons grâce au Maldi-TOF MS (MicroFlex LT and Biotyper database; Bruker, Wissembourg, France) comme précédemment décrit¹¹. Dans notre protocole standard les antibiogrammes sont ensemencés directement à partir du flacon positif sur milieu MH (I2a, Montpellier, France). Les diamètres d'inhibition sont lus avec le SIR-Scan 2000 (I2a) et interprétés selon les données du CA-SFM 2019 V1 de janvier 2019. L'ensemencement de la gélose se fait en suivant les recommandations d'inoculum du CA-SFM (qui préconise 15 gouttes de bouillon de culture dans 9mL de NaCl 0.9%²²) par ensemencement à l'écouvillon d'une gélose MH appliqué dans les 3 directions.

Les 25 antibiotiques (I2a) testés sont les suivants : Amoxicilline 10 µg (AM10), Amoxicilline-acide clavulanique 30 µg (AMC30), Ticarcilline 75 µg (TIC75), Ticarcilline-acide clavulanique 85 µg (TIM85), Pipéracilline 30 µg (PRL30), Pipéracilline-tazobactam 36 µg (TPZ36), Mécillina 10 µg (MEC10), Céfalexine 30 µg (CL30), Céfoxitine 30 µg (FOX30), Céfixime 5 µg (CFM5), Céfotaxime 5 µg (CTX5), Ceftazidime 10 µg (CAZ10), Céfépime 30 µg (FEP30), Aztréonam 30 µg (ATM30), Ertapénem 10 µg (ETP10), Imipénem 10 µg (IPM10), Méropénem 10 µg (MEM10), Gentamicine 10 µg (CN10), Amikacine 30 µg (AK30), Tobramycine 10 µg (TOB10), Acide nalidixique 30 µg (NA30), Ofloxacin 5 µg (OFX5), Ciprofloxacine 5 µg (CIP5), Triméthoprime + sulfaméthoxazole 25 µg (SXT25), Tigécycline 15 µg (TGC15).

Les antibiogrammes sont lus et validés, au minimum 16 heures après la positivité du flacon d'hémoculture²², entre 8h30 et 17h.

Un conseil d'antibiothérapie est effectué par un biologiste communiquant les résultats de l'identification du germe en fonction d'un protocole d'antibiothérapie de première intention établi en consensus avec les infectiologues du CHU de Nice.

Comparaison BSAC vs CA-SFM sur gélose MHR après inoculation de flacons d'hémocultures

L'ensemencement de l'hémoculture a été réalisé grâce à l'incubation d'un flacon contenant 10 mL de sang avec 1mL d'une souche type *E.coli* ATCC 25922 à 0,5 Mac Farland. Le flacon était détecté positif après 7 heures d'incubation. Dès la positivité du flacon d'hémoculture un ensemencement est effectué sur 2 géloses MHR (I2a) avec un inoculum suivant les recommandations du CA-SFM de 15 gouttes du flacon d'hémoculture dilué dans 9 mL (15G) de sérum physiologique et 2 géloses MHR suivant les recommandations du BSAC avec 1 goutte dans 5mL d'eau stérile (1G).

Le milieu MHR (I2a) contient des adjuvants dans la gélose permettant de mieux révéler une faible pousse bactérienne associée à des paramètres spécifiques d'acquisition d'image sur le SIR-Scan 2000 Automatic (I2a). La lecture sur l'automate se fait toutes les 1/2 heures à partir de la 6^{ème} heure et jusqu'à la 8ème heure d'incubation.

La répétabilité a été effectuée grâce à 20 antibiogrammes réalisés par le même opérateur, avec le même lot de réactifs, le même instrument et dans le délai le plus court possible.

La reproductibilité a été effectuée avec 34 antibiogrammes. Les critères de variation sont le temps et les opérateurs avec 34 opérateurs différents sur 3 jours. Les diamètres sont lus et corrigés par un biologiste en fonction du CA-SFM 2019 V1.

Les données de diamètre d'inhibition et de sensibilité ont été extraites du SIR-Scan 2000 (I2a) à l'aide du logiciel SIRWEB (I2a). Ces données ont été comparées entre elles et par rapport aux limites acceptables pour la souche *E. coli* ATCCC 25922 décrites dans le CA-SFM 2019 V1.

Comparaison MHR vs MH sur des flacons d'hémocultures positives

Les performances du milieu MHR ont été comparées à celles du milieu MH en testant les flacons positifs sur une période de 4 mois (Juin 2019 et Septembre 2019). Nous avons inclus les flacons détectés positifs mono-microbien à entérobactéries entre 9h et 16h de patients en sepsis. L'antibiogramme a été réalisé sur un flacon positif par patient. L'ensemencement du milieu MHR se fait selon les recommandations de la BSAC et celui du milieu MH se fait selon les

recommandations standard du laboratoire (CA-SFM) qui est considéré comme la référence. L'interprétation des sensibilités est faite grâce aux diamètres décrits dans le CA-SFM 2019 V1.

Discordance d'interprétation pour la comparaison MH vs MHR :

Pour chaque bactérie et chaque antibiotique nous avons comparé la concordance de l'interprétation entre les deux méthodes. Sensible = S, intermédiaire = I ou résistant = R. En cas de discordances une CMI est déterminée par technique de bandelette Etest (BioMérieux).

Les discordances étaient classées selon les critères d'interprétation suivants :

- Erreurs mineures / Minor Error (me) : antibiotiques interprétés S ou I avec une méthode et respectivement I ou R avec l'autre méthode.
- Erreurs majeures / Major Error (ME) : antibiotiques interprétés R avec le MHR-SIR et S avec la méthode standard.
- Erreurs très majeures/ Very Major Error (VME) : antibiotiques interprétés S avec le MHR et le R avec le MH standard.

Estimation de la réduction du délai de rendu de l'antibiogramme grâce à l'utilisation du MHR en direct depuis des flacons d'hémoculture positifs.

Nous avons relevé les délais d'obtention des antibiogrammes avec une étude mono-centrique entre le 1^{er} juillet 2017 et le 31 octobre 2017 sur toutes les hémocultures de patients ayant plus de 18 ans présentant une bactériémie mono-microbienne à entérobactéries. Les données concernant l'identification bactérienne, le temps d'identification bactérienne et le délai de rendu de l'antibiogramme ont été extraites depuis le système d'informatisation du laboratoire (SIL).

Un senior de microbiologie et une équipe mobile d'infectiologie sont disponibles de 8:30AM à 6:30PM. Le senior de microbiologie assure une lecture des antibiogrammes de 8:30AM à 5:00PM.

Lorsqu'une hémoculture est positive le temps estimé pour l'identification par maldi-tof et la réalisation de l'antibiogramme est de 1.5 heures. Ce délai a été calculé sur une période de 4 mois en réalisant une moyenne du temps nécessaire pour obtenir une identification bactérienne en direct depuis un flacon d'hémoculture et du temps nécessaire pour la

réalisation de l'antibiogramme. Le temps moyen nécessaire à l'incubation d'une gélose Mueller-Hinton était durant notre étude de 16 heures. Un délai de 17.5 heures est donc nécessaire pour lire un antibiogramme réalisé depuis un flacon d'hémoculture positif.

Avec le milieu MH, les hémocultures positives après 11:30PM (J0) et jusqu'à 3PM (J1) auront un antibiogramme lu et validé par un microbiologiste à partir 8:30AM (J2). Les hémocultures positives de 3PM (J1) à 11:30PM (J1) auront un antibiogramme lu et validé par le microbiologiste dès la fin d'incubation entre 8:30AM (J2) et 5PM (J2) (Fig.1).

Le temps moyen nécessaire pour une lecture par l'automate du milieu MHR était durant notre étude de 7 heures. Un délai de 8.5h était donc nécessaire pour lire l'antibiogramme réalisé depuis un flacon d'hémoculture positif. Ce délai se compose du délai moyen d'incubation (7 heures) et de 1.5 heures pour réaliser l'identification bactérienne avec l'ensemencement du milieu.

Avec le milieu MHR, les hémocultures positives entre 3PM (J1) et 12:00AM de (J2) auront un antibiogramme théoriquement lu et validé par un microbiologiste à 8:30AM (J2). Les hémocultures positives de 12:00AM (J2) à 8:30AM (J2) auront un antibiogramme lu et validé par le microbiologiste dès la fin d'incubation entre 8 :30AM (J2) et 5PM (J2). Les hémocultures positives entre 8:30AM (J1) et 3PM (J1) n'auront pas de bénéfice (sur le délai d'obtention de l'antibiogramme) à être ensemencé sur milieu MHR. (Fig.1).

Le MHR permet donc un gain de temps pour les hémocultures positives entre 3PM de J1 et 8:30AM de J2 (Fig. 1).

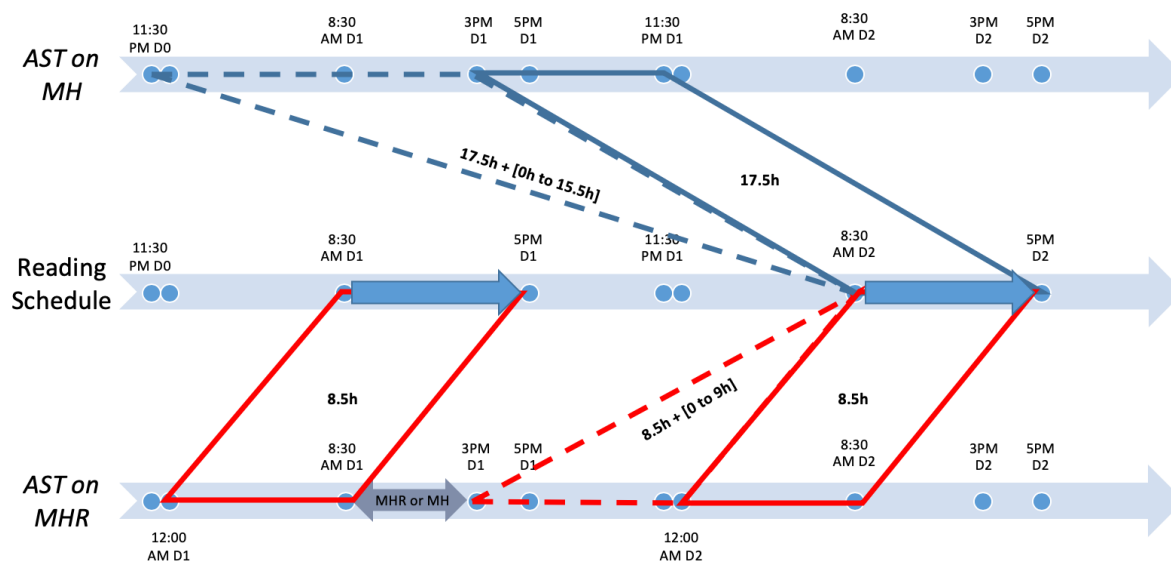


Fig.1 : Délai de lecture théorique des antibiogrammes MH et MHR en fonction des horaires de positivité de l'hémoculture. Représentation de 3 échelles, avec l'échelle supérieure qui représente les heures de positivité des flacons d'hémoculture avec le délai de 17.5 heures à 33 heures pour obtenir un antibiogramme en direct sur gélose MH. L'échelle du milieu représente les plages horaires de lecture des antibiogrammes (de 8:30AM à 5PM). L'échelle inférieure représente les heures de positivité des flacons d'hémoculture avec un délai de 8.5 heures à 17.5 heures pour obtenir un antibiogramme en direct depuis un flacon d'hémoculture positif, les hémocultures positives entre 8:30AM et 3PM peuvent être ensemencées en MH ou en MHR sans impact sur le délai d'obtention de l'antibiogramme. D0 = Jours 0, D1 = Jours 1 et D2 = Jours 2.

Nous avons ensuite estimé le gain de temps sur le rendu de l'antibiogramme que pourrait apporter le MHR par rapport au milieu MH à partir des données extraites de notre SIL.

Analyses statistiques :

Afin d'identifier les différences de diamètre pour la comparaison des recommandations CA-SFM ou BSAC nous avons utilisé un test paramétrique, le T-test (comparaison de moyenne). La recherche de différence significative entre le nombre de discordances a été réalisée grâce à un test de χ^2 . Ces deux tests ont été effectués grâce à Minitab® version 19.2020.1.0. Le résultat était significatif si le $p < 0.05$. Les graphiques ont été réalisés avec Rstudio® version 1.3.959 et R® 4.0.1.

Partie IV : Résultats

Comparaison BSAC vs CA-SFM sur gélose MHR après inoculation de flacons d'hémocultures

Sur les 1000 diamètres d'inhibition étudiés lors de l'étude de répétabilité nous avons eu 79 diamètres hors des limites de diamètres acceptables décrites dans le CA-SFM 2019 V1 pour la souche type *E. coli* ATCC 25922. Avec 20 diamètres hors bornes pour le MHR selon les recommandations d'inoculum 1G (BSAC) et 59 pour le MHR selon les recommandations d'inoculum 15G (CA-SFM). Les différences sont significatives avec $p < 0.001$ (chi2). Les diamètres hors des limites étaient répertoriés pour la cefoxitine, la céfépime, l'imipénem et le méropénem, les quinolones et le triméthoprim-sulfaméthoxazole. (Fig.2)

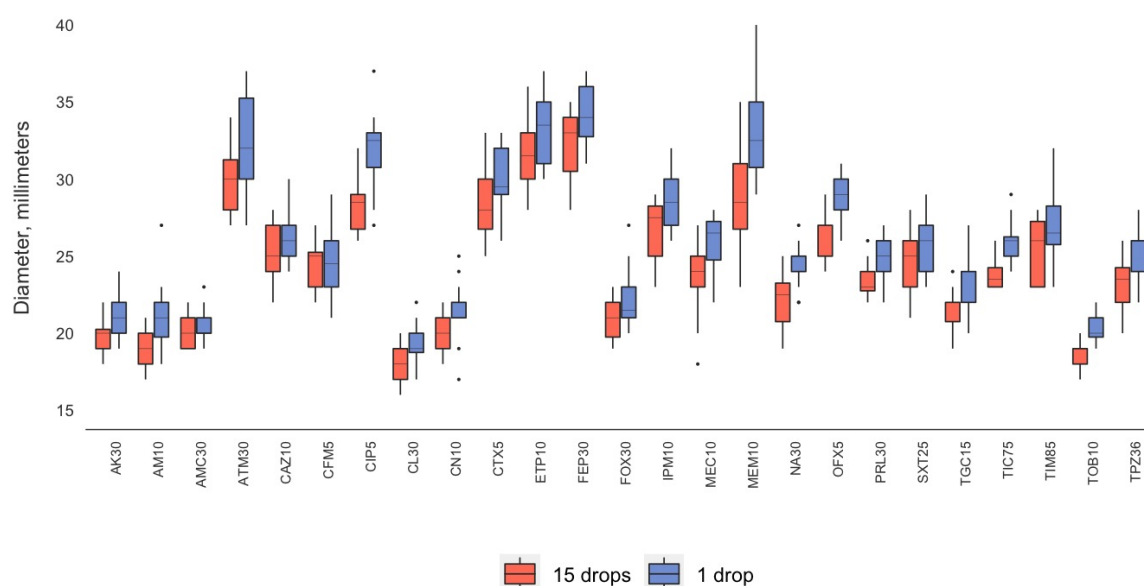


Fig.2 : Comparaison des diamètres obtenus lors de la répétabilité. 1 drop pour les recommandations de la BSAC et 15 drops pour les recommandations du CA-SFM. Le boxplot montre le 25ème et 75ème percentile avec une barre horizontale indiquant la médiane. Les moustaches représentent le 5ème et 95ème percentile. Les valeurs extrêmes sont représentées avec des points. AM10 = Amoxicilline 10 µg, AMC30 = Amoxicilline-acide clavulanique 30 µg, TIC75 = Ticarcilline 75 µg, TIM85 = Ticarcilline-acide clavulanique 85 µg, PRL30 = Pipéracilline 30 µg, TPZ36 = Pipéracilline-tazobactam 36 µg, MEC10 = Mécillinaam 10 µg, CL30 = Céfalexine 30 µg, FOX30 = Céfoxitine 30 µg, CFM5 = Céfixime 5 µg, CTX5 = Céfotaxime 5 µg, CAZ10 = Ceftazidime 10 µg, FEP30 = Céfépime 30 µg, ATM30 = Aztréonam 30 µg, ETP10 = Ertapénem 10 µg, IPM10 = Imipénem 10 µg, MEM10 = Méropénem 10 µg, CN10 = Gentamicine 10 µg, AK30 = Amikacine 30 µg, TOB10 = Tobramycine 10 µg, NA30 = Acide nalidixique 30 µg, OFX5 = Ofloxacin 5 µg, CIP5 = Ciprofloxacine 5 µg, SXT25 = Triméthoprim + sulfaméthoxazole 25 µg, TGC15 = Tigécycline 15 µg.

Sur les 1700 diamètres étudiés lors de l'étude de reproductibilité nous avons eu 145 diamètres hors des limites de diamètres acceptables décrites dans le CA-SFM 2019 V1 pour la souche type *E. coli* ATCC 25922. Avec 56 diamètres hors bornes pour le MHR selon les recommandations d'inoculum 1G et 91 pour le MHR selon les recommandations d'inoculum 15G. Ces différences sont significatives avec $p = 0.003$. Les antibiotiques touchés étaient l'amoxicilline, la céfoxitine, la céfixime, la céfépime, le méropénem, les quinolones et le triméthoprim-sulfaméthoxazole. (Fig.3)

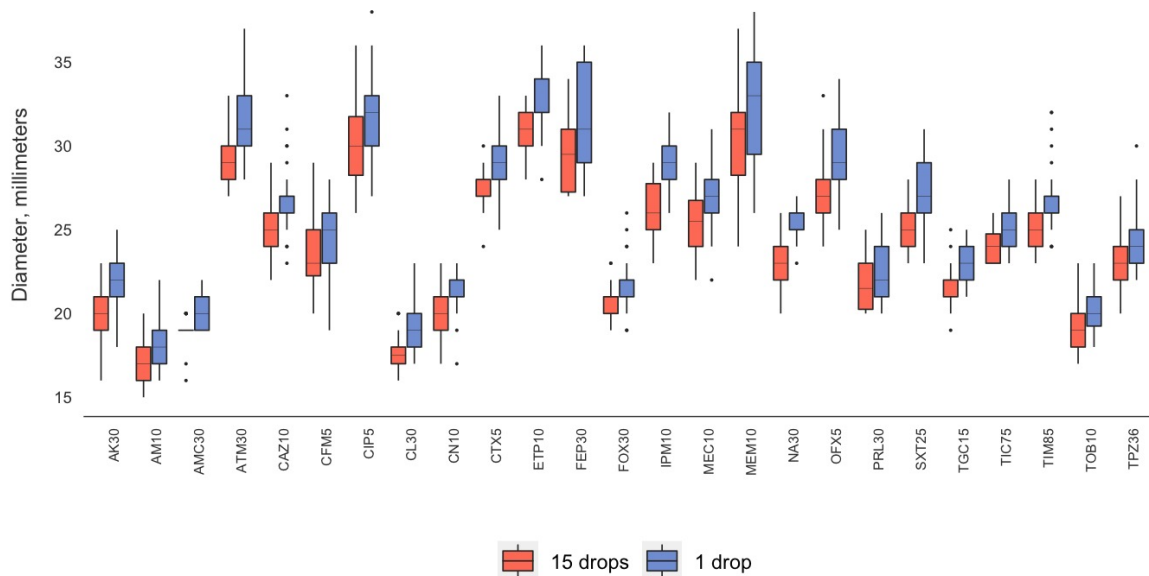


Fig.3 : Comparaison des diamètres lors de la reproductibilité. 1 drop pour les recommandations de la BSAC et 15 drops pour les recommandations du CA-SFM. La boxplot montre le 25ème et 75ème percentile avec une barre horizontale indiquant la médiane. Les moustaches représentent le 5ème et 95ème percentile. Les valeurs extrêmes sont représentées avec des points. AM10 = Amoxicilline 10 µg, AMC30 = Amoxicilline-acide clavulanique 30 µg, TIC75 = Ticarcilline 75 µg, TIM85 = Ticarcilline-acide clavulanique 85 µg, PRL30 = Pipéracilline 30 µg, TPZ36 = Pipéracilline-tazobactam 36 µg, MEC10 = Mécillinaam 10 µg, CL30 = Céfalexine 30 µg, FOX30 = Céfoxitine 30 µg, CFM5 = Céfixime 5 µg, CTX5 = Céfoxitaxime 5 µg, CAZ10 = Ceftazidime 10 µg, FEP30 = Céfépime 30 µg, ATM30 = Aztréonam 30 µg, ETP10 = Ertapénem 10 µg, IPM10 = Imipénem 10 µg, MEM10 = Méropénem 10 µg, CN10 = Gentamicine 10 µg, AK30 = Amikacine 30 µg, TOB10 = Tobramycine 10 µg, NA30 = Acide nalidixique 30 µg, OFX5 = Ofloxacine 5 µg, CIP5 = Ciprofloxacine 5 µg, SXT25 = Triméthoprim + sulfaméthoxazole 25 µg, TGC15 = Tigécycline 15 µg.

Le nombre de diamètres hors des limites acceptables a été groupé entre la répétabilité et la reproductibilité afin d'augmenter la taille des effectifs par antibiotique et identifier les antibiotiques les plus significativement touchés. Nous n'avons pas observé de différences significatives pour l'amoxicilline, la céfoxitine, la céfixime, la céfépime, l'imipénem, le méropénem. Une différence significative a été observée pour les quinolones (Acide nalidixique, Ofloxacin et Ciprofloxacin) (Table 1)

Table 1 : Comparaison du nombre de diamètres hors des limites définies pour la souche *E. coli* ATCC 25922 en fonction des conditions d'inoculations 1 goutte (BSAC) et 15 gouttes (CA-SFM) sur le milieu MHR.

Antibiotic (n=54)	Value out of acceptable limits with 1 drop	Value out of acceptable limits with 15 drop	<i>p</i>
Amoxicillin	6	10	NS*
Cefoxitine	22	41	NS
Cefixime	6	2	NS
Cefepime	11	22	NS
Imipenem	1	4	NS
Meropenem	12	10	NS
Nalidixic acid	1	8	0,026
Ofloxacin	13	38	0,04
Ciprofloxacin	2	13	0,008
Trimethoprim-sulfamethoxazole	2	2	NS
Total	76	150	

*= non significatif.

Une comparaison des diamètres de lecture entre les recommandations 1G et 15G a été effectuée par comparaison de moyenne. Pour la répétabilité une différence statistiquement significative était observée pour tous les antibiotiques à l'exception de l'Amoxicilline-Acide clavulanique, Ticarcilline-acide clavulanique, la Céfixime, Ceftazidime, Gentamicine et le triméthoprim + sulfaméthoxazole. Pour la reproductibilité une différence statistiquement significative était observée pour tous les antibiotiques à l'exception de l'amoxicilline, la pipéracilline, le mécillinam, le méropénem, la gentamicine et l'ofloxacin.

Pour l'utilisation du MHR, les résultats obtenus en suivant les recommandations de la BSAC présentent moins de diamètres hors des limites acceptables par rapport aux recommandations du CA-SFM.

Comparaison MHR vs MH sur des flacons d'hémocultures positives

71 flacons d'hémocultures positives monomicrobiennes ont été recueillis pendant la période d'étude chez des patients en sepsis. Les bactéries identifiées étaient : *E. coli* (n=36), *K. pneumoniae* (n=15), *E. cloacae* (n=6), *P. mirabilis* (n=5), *S. marcescens* (n=4), *E. aerogenes* (n=2), *K. oxytoca* (n=2), *M. morganii* (n=1). Les souches avaient un profil de résistance aux bêta-lactamines de type sauvage pour 46 d'entre-elles, 15 avec une pénicillinase, 1 avec une céphalosporinase hyperproduite, 1 avec une céphalosporinase acquise et 8 avec une BLSE (Table 2).

Table 2 : Liste des différentes espèces bactériennes de l'étude avec leurs profils de résistances par rapport aux bêta-lactamines.

Identification	Number	Beta-lactamin profile
<i>Escherichia coli</i>	36	17 Wild Type
		2 Inhibitor-resistant TEM
		4 High level penicillinase
		8 Penicillinase
		1 Plasmid cephalosporinase
		4 Extended spectrum beta-lactamase producing enterobacteriaceae (ESBL)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	15	12 Wild Type
		3 ESBL
<i>Enterobacter cloacae</i>	6	5 Wild Type
		1 ESBL
<i>Proteus mirabilis</i>	5	4 Wild Type
		1 Penicillinase
<i>Serratia marcescens</i>	4	3 Wild Type
		1 Hyperproduction of the chromosomal cephalosporinase (AmpC)
<i>Enterobacter aerogenes</i>	2	2 Wild Type
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	2 Wild Type
<i>Morganella morganii</i>	1	1 Wild Type

Ces 71 flacons d'hémocultures nous ont permis de tester 1775 combinaisons (25 antibiotiques x 71). Sur ces combinaisons nous avons eu 7 erreurs. 1 minor error pour le trimethoprim-sulfamethoxazole, 5 Major error pour les quinolones (4 Major error pour la ciprofloxacine et 1 pour l'ofloxacine) et 1 Very Major Error pour le trimethoprim-sulfamethoxazole (Table 3). Ces discordances ont été confirmé en E-test.

Le milieu MHR présente donc une concordance dans 99,6% avec le milieu MH. Ces résultats ont donc montré une excellente corrélation de catégorisation clinique entre les diamètres MHR-SIR et la méthode standard.

Table 3 : Erreurs de catégorisation des antibiotiques du milieu MHR par rapport au milieu MH.

Species	Mistake		
	MHR Minor	MHR Major	MHR VME
<i>Escherichia coli</i>	Trimethoprim-sulfamethoxazole		
<i>Serratia marcescens</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ofloxacin	
<i>Klebsiella pneumoniae</i>			Trimethoprim-sulfamethoxazole

La lecture des antibiogrammes de MHR étant toujours effectuée grâce à l'interface SIR-Scan nous rapportons une visualisation difficile des synergies de BLSE par rapport au milieu MH en raison de la pousse fine fréquemment retrouvée sur la gélose MHR (Fig.4). Sur les 8 BLSE, il n'y a qu'une seule fois où nous n'avons pas réussi à visualiser les synergies.

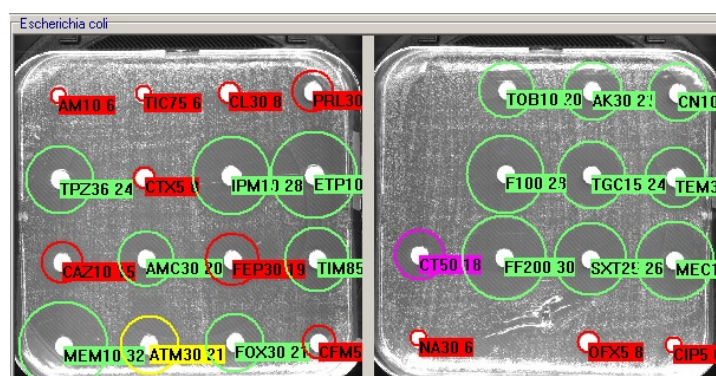


Fig.4 : *E. coli* BLSE sur milieu MHR avec une lecture en 7h depuis un flacon hémoculture.

Estimation de la réduction du délai de rendu de l'antibiogramme grâce à l'utilisation du MHR en direct depuis des flacons d'hémoculture positifs.

Durant la période du 1^{er} juillet 2017 au 31 octobre 2017 nous avons eu 161 hémocultures monomicrobiennes positives à entérobactéries. 121 hémocultures étaient positives entre 3PM et 8:30AM. 43 entre 3 PM et 00:00 et 78 entre 00:00 et 8:30AM. (Fig.5)

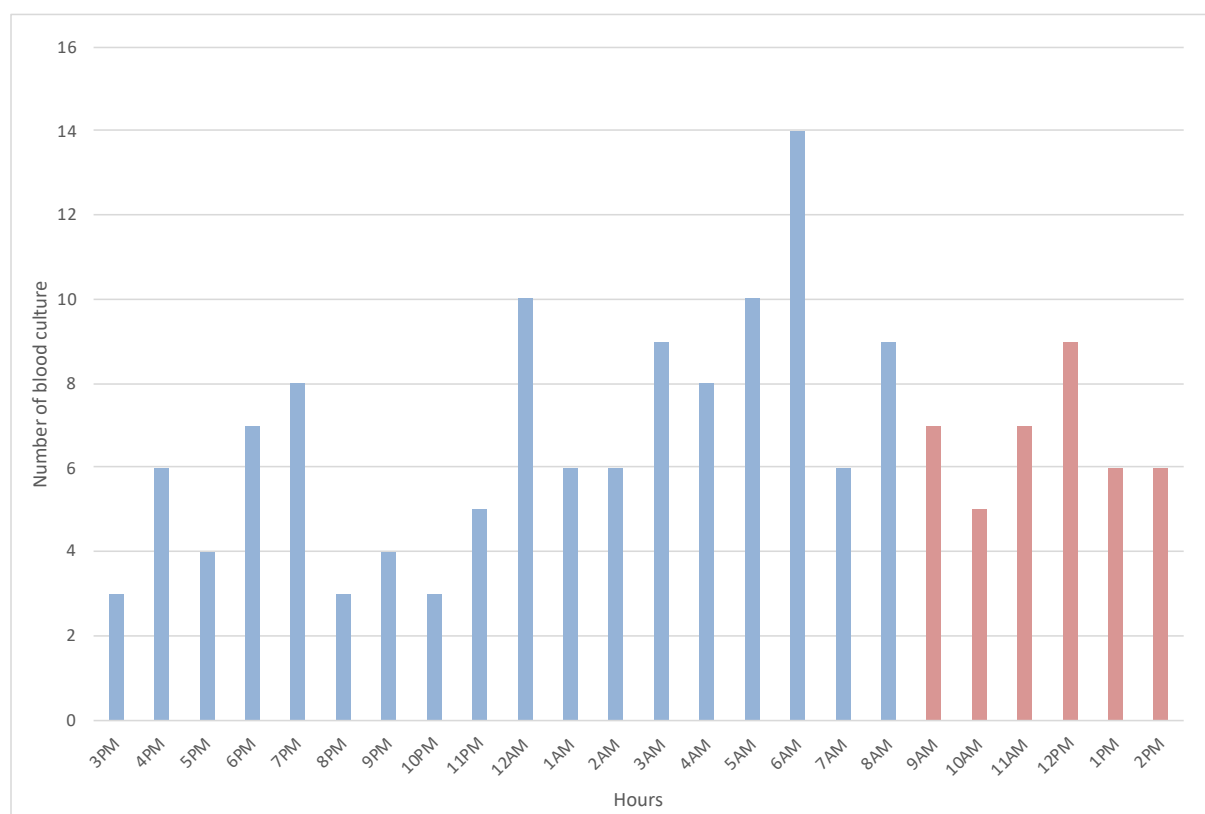


Fig.5 : Répartition du nombre d'hémocultures positives en fonction de l'heure de la journée. En bleu les hémocultures pouvant bénéficier d'une réduction de délai en cas de réduction du MHR et en rouge les hémocultures n'en bénéficiant pas.

La mise en place du MHR permet un rendu de l'antibiogramme en 8.5 heures pour toutes les hémocultures positives entre 00:00 et 8:30AM soit 48.5% des hémocultures de notre étude (78/161) et un rendu en moins de 17.5 heures pour toutes les hémocultures positives entre 3PM et 00:00 soit 26.7% des hémocultures de notre étude (43/161). Le MHR permet de bénéficier d'une réduction de temps pour 75.1% des hémocultures.

Le temps moyen nécessaire au rendu définitif de l'antibiogramme avec le milieu MH est de 27 heures avec un temps minimum de 17 heures et 30 minutes et un temps maximum de 36 heures et 30 minutes. Dans le cadre de l'utilisation théorique du MHR le temps moyen est de 10 heures et 50 minutes avec un délai minimum pour obtenir un antibiogramme validé de 8 heures et 30 minutes et un délai maximum de 23 heures et 52 minutes (Fig.6). Nous avons en moyenne une réduction de 16 heures du délai pour obtenir un antibiogramme.

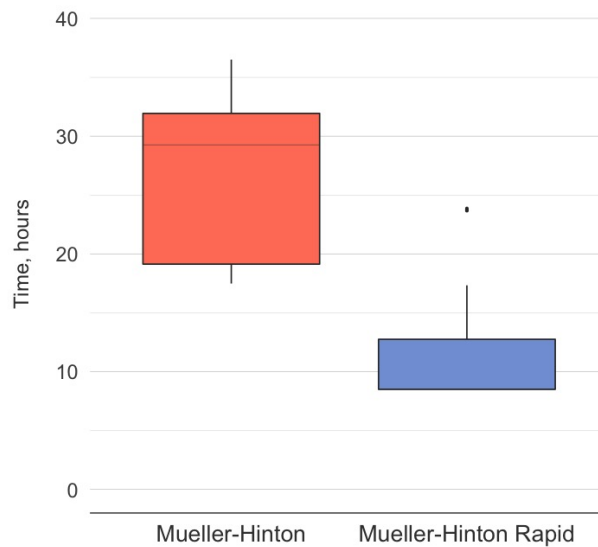


Fig.6 : Temps nécessaire pour obtenir l'antibiogramme en direct depuis un flacon d'hémoculture pour le MHR et pour le MH. Les boxplots montrent le 25ème et 75ème percentile avec la barre horizontale montrant la médiane. Les moustaches (whiskers) représentent le 5ème et 95ème percentile. Les outliers (valeurs extrêmes) sont représentés par des points.

Partie V : Discussion

Dans ce travail nous avons montré que le MHR était comparable à la méthode standard avec le bénéfice d'un délai d'incubation raccourci à 7 heures +/- 30 minutes. Cette gélose permet ainsi une diminution importante du délai d'incubation de l'antibiogramme avec une excellente concordance par rapport à la méthode effectuée en routine au sein du laboratoire. Ce résultat confirme l'étude déjà effectuée sur les flacons d'hémoculture²³. Ce milieu s'ajoute donc aux techniques actuelles d'identification phénotypique rapide à partir d'un flacon d'hémoculture positif¹⁷ avec un coût faible, une bonne reproductibilité et une adaptation simple au sein du workflow du laboratoire.

Pour la première fois sur le milieu MHR nous avons comparé les recommandations d'inoculum de la BSAC²¹ vs CA-SFM²² avec moins de discordance en faveur de l'inoculum proposé par la BSAC. Plusieurs méthodes sont décrites pour ensemercer un antibiogramme directement depuis un flacon d'hémoculture positive mais aucune ne fait pour l'instant consensus²⁴⁻²⁶. Des études souhaitant standardiser les recommandations d'inoculum ont échoué à trouver l'inoculum parfait²⁷. Les recommandations sont donc souvent nationales. Notre résultat est en faveur d'une utilisation du milieu MHR en suivant les recommandations de la BSAC malgré l'incrément dans l'EUCAST de l'ATU sensé absorber les variations dues à une différence d'inoculum²⁸. L'ATU (Area of Technical Uncertainty) correspond à des zones d'incertitude technique. Le but est de minimiser la variations systémiques et aléatoires afin de ne pas compromettre la reproductibilité des tests.

Ici, deux sources de variation peuvent expliquer la différence observée entre les recommandations CA-SFM et BSAC. Premièrement, le diamètre CA-SFM était significativement réduit pour la majorité des antibiotiques, en lien avec l'utilisation d'un inoculum initial plus important. Deuxièmement, l'utilisation de deux milieux différents pour diluer l'hémoculture, du sérum physiologique pour le CA-SFM, de l'eau stérile pour le BSAC peut avoir un impact sur la culture bactérienne comme il a été montré dans une étude ancienne²⁹.

L'identification en direct des hémocultures et la réalisation des antibiogrammes 24/7³⁰ associés à la lecture des antibiogrammes de 8h30 à 17 heures sont des adaptations techniques et organisationnelles qui permettent un rendu plus rapide de l'antibiogramme. L'identification en direct depuis un flacon d'hémoculture positif permet un gain de 12 à 24 heures par rapport à l'identification par culture bactérienne¹⁷. A ce gain de temps s'ajoute ensuite la réduction du

délai permise par l'ouverture 24/7 avec une réduction de 3.4 heures du délai depuis le prélèvement veineux à l'incubation dans l'automate et 10.4 heures sur l'adaptation de l'antibiothérapie³¹.

Le temps moyen gagné du MHR comparé à la méthode standard était de 16 heures comme il a été montré dans l'étude récente sur le milieu MHR²⁰. Au sein du CHU de Nice, l'identification en direct depuis les flacons d'hémoculture de 96%¹¹ des entérobactéries couplée à un rendu en moins de 8.5 heures de la majorité des antibiogrammes permettrait de réduire la durée d'hospitalisation¹², les complications et la mortalité hospitalière⁸.

L'équipe mobile d'infectiologie disponible de 8h30 à 18h30 permet de faire le lien entre le rendu rapide des phénotypes de résistance et l'adaptation de l'antibiothérapie chez le patient³².

Grâce à la mise en place du MHR nous allons permettre un gain sur le temps nécessaire au rendu de l'antibiogramme pour 75.1% des hémocultures avec un gain théorique moyen de 16 heures. Ce gain est à revoir en fonction des facteurs humains et de l'organisation du travail au sein de notre laboratoire. En effet le workflow du MHR devrait permettre une validation biologique dès la disponibilité du MHR (entre 8:30AM et 5PM) mais un délai lié à la disponibilité du biologiste peut exister. Nous apportons ici une explication précise de l'intégration de ce milieu au sein d'un laboratoire hospitalier de microbiologie ce qui n'a pas été réalisé dans l'étude précédente.

L'intégration du milieu MHR au sein du workflow du laboratoire doit respecter les critères de la norme ISO 15189.

La lecture du milieu est réalisée par l'interface informatique du SIR-Scan (I2a), il n'y a donc plus la possibilité d'utiliser le pied à coulisse pour s'aider en cas de diamètre difficile à lire. On peut donc observer une difficulté à la lecture lorsque les conditions d'acquisition d'image sont mauvaises ou lorsque les limites entre la zone d'inhibition et la zone de pousse sont mal délimitées.

Nous ajoutons que les images synergiques des BLSE peuvent s'avérer difficiles à interpréter (Fig.4), dans ce cas la détection des BLSE peut être confirmée à l'aide d'un algorithme décisionnel sur le phénotype de résistance. La confirmation d'une BLSE est basée sur la

présence d'un diamètre <6mm pour la ticarcilline, la résistance à la céfotaxime associée à une céfoxitine sensible pour les entérobactéries du groupe 1 et 2 lorsqu'il n'y avait pas de co-résistance. Si un doute était présent sur les entérobactéries du groupe 3, une gélose MH avec de la cloxacilline était réalisée avec un rapprochement de disque.

Nous avons constaté une pousse fine uniforme sur l'ensemble de la gélose de façon assez fréquente n'empêchant pas la lecture des antibiogrammes. Le milieu MHR a cependant montré une excellente concordance avec le milieu MH et a permis un raccourcissement du temps de rendu de l'antibiogramme. De plus cette méthode phénotypique permet d'étudier la sensibilité à 25 antibiotiques et de détecter les dérégulations de céphalosporinases ¹⁷.

Récemment l'EUCAST a publié des diamètres spécifiques en fonction du délai d'incubation et de l'espèce pour une lecture sur MH standard au bout de 4, 6 ou 8 heures d'incubation. Pour le développement de cette méthode l'EUCAST recommande de prélever 125µl depuis le flacon d'hémoculture à déposer directement sur la gélose et d'incuber les boîtes sur une durée maximale de 8 heures. La multiplication des diamètres de lecture en fonction du temps d'incubation et de l'espèce risque de compromettre l'utilisation dans les laboratoires de microbiologie. L'intégration du MHR au sein du workflow sera plus aisée et moins contraignantes.

Notre étude comporte cependant plusieurs limites. Nous avons un faible effectif d'hémocultures sur lesquels un milieu MHR en direct a été réalisé et notre étude est monocentrique. Notre échantillon de bactéries représente une épidémiologie classique de laboratoire et donc comporte une faible quantité de bactéries BLSE et une absence de carbapénémases. Une collection de souches avec des carbapénémases et BLSE permettrait d'explorer de façon plus poussée les limites de l'automate permettant l'acquisition des images (SIR-scan). Cette étude apporte une réduction de délai théorique qu'il serait nécessaire de confirmer dans les conditions d'utilisation du milieu MHR. L'évaluation du nombre d'erreurs n'a pas été faite sur le nombre de résistants mais sur le nombre total d'antibiotiques testés³³.

Partie VI : Conclusion et perspectives

Nos résultats ont montré une excellente corrélation entre les deux méthodes MH et MHR-SIR. Cette méthode permet une identification phénotypique rapide, jusqu'à présent impossible.

Le laboratoire de microbiologie clinique du CHU de Nice travaille actuellement sur le développement d'une forte coopération avec le service d'infectiologie ce qui permettra une adaptation précoce de l'antibiogramme. Associé à cette coopération un conseil antibiotique sera directement intégré au rendu de l'antibiogramme afin d'inciter les cliniciens à adapter l'antibiothérapie notamment chez les patients en sepsis.

Partie VII : Conclusion générale

Dans un environnement hospitalier à la recherche perpétuelle de rapidité, les techniques de diagnostic moléculaire, avec principalement l'arrivée de la PCR multiplex, ont fortement bousculé les méthodes conventionnelles, lentes chronophages et fortement dépendantes d'une intervention humaine. Ces PCR présentent l'avantage d'obtenir un résultat rapide avec une excellente sensibilité et spécificité associés à peu de manipulations techniques. L'interprétation biologique de ces tests est restreinte avec pour les techniques multiplex commerciales un rendu binaire (positif/négatif).

La détection rapide des phénotypes de résistances bactériennes est un enjeu majeur permettant de repositionner dans un délai convenable face à l'urgence, le rendu des profils phénotypiques de résistance bactérienne. Ces méthodes permettent d'étudier l'expression des gènes de résistance et ont un avantage sur la détection des céphalosporinase hyperproduite. L'avantage que procure le MHR est aussi au niveau médico-économique. En effet plusieurs centaines d'euros sont nécessaires afin de rechercher 9 gènes de résistance pour les méthodes les plus performantes (Verigene® Bloodstream Infection Testing Panels (Luminex Corporation, Nanosphere, Northbrook, Etats-Unis)) avec un délai de 2.5 heures.

La méthode phénotypique MHR permet d'obtenir le résultat de 25 antibiotiques avec une concordance par rapport au gold standard (MH) de 99.6% et pour un coût inférieur à 9 euros. Le MHR associé aux modifications organisationnelles et technologiques effectuées au sein du laboratoire permet un gain de 16 heures en moyenne sur le rendu de l'antibiogramme.

Le laboratoire propose donc en cas d'identification d'une entérobactérie sur le flacon d'hémoculture d'effectuer une gélose MHR en direct depuis le flacon, ce qui permet d'obtenir le résultat de l'antibiogramme dans un délai minimum de 8,5 heures. En cas d'identification d'un *S. aureus* ou en cas de cocci gram positifs en amas non identifiés par la spectrométrie de masse de faire une PCR MRSA (GeneXpert® System) avec un résultat disponible en 1 heure. Cette PCR permet d'adapter rapidement l'antibiothérapie avec de la céfazoline en cas d'absence du gène *mecA* ou de la Daptomycine/Vancomycine le cas échéant. Lorsque les hémocultures sont positives à un autre germe, un protocole standard avec une gélose MH sera réalisé.

La PCR et le milieu MHR sont donc complémentaires. L'utilisation en routine du milieu MHR peut être associée à l'utilisation de la PCR multiplex pour certain cas critiques selon un

algorithme défini avec l'équipe mobile d'infectiologie. L'équipe mobile d'infectiologie est l'élément permettant le lien entre le laboratoire et le service d'hospitalisation. Sans coopération efficace entre ces deux unités le gain de temps du laboratoire n'est pas transformé en gain pour le patient.

Les objectifs à venir pour notre laboratoire seront de réduire le délai d'identification par spectrométrie de masse des germes en direct depuis les flacons d'hémoculture. En raison du travail en lot de notre laboratoire un délai de 1,5 heures est nécessaire pour obtenir une identification du germe avec un ensemencement de l'antibiogramme. Un travail en continu permettrait de gagner une heure sur le délai d'obtention du résultat de l'antibiogramme MHR et de réduire encore l'écart de temps entre la PCR et le milieu MHR.

Partie VIII : Article

EVALUATION OF A DIRECT ANTIBIOGRAM ON BLOOD CULTURE IN LESS THAN 8 HOURS BY
THE RAPID MUELLER-HINTON DIFFUSION METHOD

J. Kasprzak¹, A. Gaudart¹, K. Legueult⁴, C. Pradier⁴, R. Lotte ^{1,2,3}, R. Ruimy^{1,2,3}

¹) Laboratoire de Bactériologie, Hôpital L'archet 2, CHU de Nice, Nice, France

²) INSERM U1065, Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Équipe 6, Nice, France

³) Faculté de Médecine, Université Côte d'Azur, Nice, France

⁴) Département de santé publique, CHU de Nice, Nice, France

Corresponding author :

James Kasprzak, Microbiologie, Hôpital l'Archet 2, CHU de Nice, Nice, France ; 151 Route de
Saint Antoine, 06200 NICE, France ; +33 4 92 03 62 14 ; Mail : james@kasprzak.fr

Abstract :

Introduction: The time necessary to give the results of an antibiotic susceptibility test in agar MH from a positive blood culture sample is usually between 16 to 24 hours. In the event of sepsis, any delay in the early adaptation of the antibiotic therapy to the results of the antibiotic susceptibility test increases the mortality rate. A new MHR medium reduces this delay to 6-8 hours. There is actually little data available on the assessment of this environment.

Objectives: We have compared the performance of the MHR versus the MH medium for performing antibiograms directly from enterobacteria positive blood culture bottles and estimated the time that was saved on the turnaround time of the antibiogram.

Methods: The performance of the MHR medium was studied with an *E. coli* strain ATCC 25922 which was inoculated into the blood culture bottles. The sensitivity of 25 antibiotics was tested and the diameters were read by camera (SIR-scan). The results obtained with two inoculum 1 drop/5mL (1D) and 15 drops/15mL (15D) were compared to the acceptable limits of the strain. The antibiograms of 71 enterobacteria-positive blood cultures (wild-type, hyperCase, ESBL) in sepsis patients were compared in mediums MHR versus MH. The effective time saving was calculated with a validation of the antibiograms from 8:30 AM to 5PM. The statistical tests were performed with « R ».

Results: Of the 1000 diameters tested in the repeatability study, 20 (2%) of the diameters were out of bounds with a 1D inoculum and 59 (5,9%) with 15D ($p<0.001$). Of the 1700 diameters tested in the reproducibility study, we had 56 (3.3%) out of bounds diameters with a 1D inoculum and 91 (5.3%) with a 15D inoculum ($p=0.003$). For the rest of the study, we chose a 1D inoculum. Out of the 1775 diameters tested from blood culture bottles that were positive for enterobacteriaceae, we had 7 errors with the MHR: 1 minor error and 1 Very Major Error for trimethoprim-sulfamethoxazole, and 5 Major Errors for fluoroquinolones, which makes an agreement rate of 99.6%. Finally, the theoretical average time gained on the antibiogram is 16 hours.

Conclusion: Our results showed an excellent performance of the MHR medium for performing direct antibiogram susceptibility testing from enterobacteria positive blood culture bottles and a good correlation between the MH and MHR medium with a turnover time of the antibiotic susceptibility test in 8.5 hours.

Introduction

Sepsis is a major public health problem due to a high mortality rate which is estimated at 10% among children and 38.4% among the elderly¹. The increased mortality in sepsis patients is due to delayed antibiotic administration², inappropriate antibiotic therapy^{3,4} or the presence of bacterial resistance such as Extended-Spectrum β -Lactamase (ESBL)⁵. The bacteria responsible for sepsis can be detected in blood cultures. Sensitivity results (antibiograms) are used to adjust the antibiotic therapy. A faster turnover time of the antibiogram is associated with improved clinical outcome in sepsis patients⁶. Currently, the results of the antibiogram from a positive blood culture bottle are obtained in 16 to 24 hours. The bacteria mostly involved in sepsis are enterobacteria and *Staphylococcus aureus*⁷.

These last few years, bacteriology laboratories have improved their management of blood culture bottles. Initially they have expanded their 24/7 working hours⁸ in order to continuously incubate the blood culture bottles in the automated devices. However, the reading and validation of the antibiograms remain activities that are carried out between 8:30AM and 5:00PM.

Secondly, the use of proteomics with mass spectrometry (Maldi-tof) enabled an on-line identification from the positive blood culture bottles within 10 minutes to 1 hour or after a 4-hour pre-culture⁹. In our laboratory the method (lysis + washing) allows the identification of 80% of the bacteria (96% of the enterobacteria) within 10 minutes¹⁰. An initial adaptation of probabilistic antibiotic therapy can therefore be made on the basis of these results. This on-line identification avoids the subculture stage, which requires an additional 24 hours¹¹.

Several molecular methods have been developed and used to detect bacterial resistance directly on positive blood culture bottles. For example, the detection of methicillin resistance in *S. aureus* by Xpert MRSA/SA (Cepheid, Sunnyvale, CA) is used for gram-positive cocci clusters in blood culture bottles in order to adapt the treatment. Resistance in enterobacteria can also be detected by molecular tests targeting multiple resistance genes¹². The disadvantage of these techniques is that they have a significant cost premium and medico-economic studies are currently underway to define the place of these tests in the diagnostic strategy. Moreover, these techniques do not detect hyperproduced cephalosporinases⁹. Phenotypic methods remain for the moment gold standard allowing to test the bacterium's

sensitivity to a large panel of antibiotics. However, the result of the antibiogram from a positive vial requires a delay of 16 to 24 hours.

Recently a method of rapid turnover time of antibiograms by diffusion on a culture medium has been developed. This method uses a special medium containing adjuvants in the agar (MHR) combined with an early reading of the diameters by a camera (SIR-scan). This Mueller-Hinton Rapid-SIR (MHR) medium has just been evaluated and it would allow a gain of 17 hours on the antibiogram turnover time¹³. In the study of Pilmis et al. 2019, there was no evaluation of the performance of the MHR medium and no comparative study of the MHR medium versus the MH medium on positive blood culture bottles. Moreover it was conducted on enterobacteria and *S. aureus* antibiotic susceptibility and testing was performed directly from positive blood culture bottles following the inoculum recommendations of the British society for antimicrobial chemotherapy¹⁴. The use of PCR to search for the *mecA* gene by the majority of laboratories limits the use of a MHR medium for *S. aureus*. In addition, it is not recommended if the validation of the antibiograms is done between 8.30 AM and 6.30 PM.

In addition, since 2018, French microbiology laboratories have been following the CA-SFM inoculum recommendations for performing a direct antibiogram from a positive blood culture bottle. These recommendations are different from those used in the previously published work¹³.

The objectives of our work are: (i) to evaluate the performance (repeatability and reproducibility) of MHR according to the inoculum recommendations proposed by the BSAC and the CA-SFM, (ii) to compare MHR/MH results obtained on enterobacteria positive blood culture vials from sepsis patients, (iii) to estimate the reduction in the turnover time of enterobacteria antibiograms performed directly from a blood culture bottles in our laboratory where the reading of the antibiotic susceptibility test is performed from 8:30AM to 5:00PM.

Matériels et méthodes

This work was carried out in the Bacteriology Laboratory of the University Hospital of Nice. This establishment takes care of adults and children with a capacity of 1667 beds. The laboratory processes 65,000 blood culture bottles annually and this activity represents 49% of the analyses performed. Our laboratory ensures a permanent activity 24/7 for the taking in charge of the samples. All the blood cultures collected are incubated in an automated device (BacT/ALERT® 3D automated device (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France)) until positive results are detected. Positive blood cultures benefit from Gram staining (PREVI® Color automated Gram staining system (bioMérieux)), direct identification on the vials using Maldi-TOF MS (MicroFlex LT and Biotyper database; Bruker, Wissembourg, France) as previously described¹⁰. In our standard protocol the antibiograms are inoculated directly from the positive vial onto the MH medium (I2a, Montpellier, France). The inhibition diameters are read with the SIR-scan 2000 (I2a) and interpreted according to the CA-SFM 2019 V1 data of January 2019. Agar inoculation is carried out according to the CA-SFM inoculum recommendations (which recommends 15 drops of culture broth in 9mL of 0.9% NaCl¹⁵) by swab inoculation of MH agar applied in all 3 directions. The 25 antibiotics (I2a) tested are as follows: Amoxicillin 10 µg (AM10), Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg (AMC30), Ticarcillin 75 µg (TIC75), Ticarcillin-clavulanic acid 85 µg (TIM85), Piperacillin 30 µg (PRL30), Piperacillin-tazobactam 36 µg (TPZ36), Mecillinam 10 µg (MEC10), Cefalexin 30 µg (LC30), Cefoxitin 30 µg (FOX30), Cefixime 5 µg (CFM5), Cefotaxime 5 µg (CTX5), Ceftazidime 10 µg (CAZ10), Cefepime 30 µg (FEP30), Aztreonam 30 µg (ATM30), Ertapenem 10 µg (ETP10), Imipenem 10 µg (IPM10), Meropenem 10 µg (MEM10), Gentamicin 10 µg (CN10), Amikacin 30 µg (AK30), Tobramycin 10 µg (TOB10), Nalidixic acid 30 µg (NA30), Ofloxacin 5 µg (OFX5), Ciprofloxacin 5 µg (CIP5), Trimethoprim + sulfamethoxazole 25 µg (SXT25), Tigecycline 15 µg (TGC15).

Antibiograms are read and validated at least 16 hours after the blood culture bottle tests positive¹⁵, between 8.30 AM and 5 PM.

An antibiotic therapy advice is carried out by a microbiologist communicating the results of the identification of the germ according to a first-line antibiotic therapy protocol established in consensus with the infectiologists of the Nice University Hospital.

Comparison of BSAC vs. CA-SFM on MHR agar after inoculation of blood culture bottles

133 The blood culture was inoculated by incubating a vial containing 10 mL of blood with 1mL of
134 0.5 Mac Farland *E. coli* strain ATCC 25922. The vial was detected positive after a 7-hour
135 incubation period. As soon as the blood culture vial is positive, inoculation is performed on 2
136 MHR(I2a) agars with an inoculum according to the recommendations of CA-SFM of 15 drops
137 from the blood culture vial diluted in 9 mL (15D) of saline and 2 MHR agars according to the
138 recommendations of BSAC with 1 drop in 5mL of sterile water (1D).

139 The MHR medium (I2a) contains agar adjuvants which allows to better reveal weak bacterial
140 growth associated with specific image acquisition parameters on the SIR-scan 2000 Automatic
141 (I2a). The reading on the automated device is done every 1/2 hour from the 6th hour to the
142 8th hour of incubation.

143 Repeatability was achieved with 20 antibiograms performed by the same operator, using the
144 same batch of reagents, the same instrument and in the shortest possible time.

145 Reproducibility was performed with 34 antibiograms. The variation criteria are time and
146 operators with 34 different operators over 3 days. The diameters are read and corrected by a
147 microbiologist according to CA-SFM 2019 V1.

148 The inhibition diameter and sensitivity data were extracted from the SIR-scan 2000 (I2a) using
149 the SIRWEB software (I2a). These data were compared to each other and to the acceptable
150 limits for *E. coli* strain ATCCC 25922 described in CA-SFM 2019 V1.

151 MHR vs. MH comparison on positive blood cultures

152 The performance of the MHR medium was compared to that of the MH medium by testing
153 positive vials over a 4-month period (June 2019 and September 2019). We have included the
154 vials that were detected positive to a mono-microbial enterobacteria between 9am and 4pm
155 from sepsis patients. The antibiogram was performed on one positive vial per patient. The MHR
156 medium is inoculated according to the recommendations of the BSAC and the MH medium is
157 inoculated according to the standard recommendations of the laboratory (CA-SFM) which is
158 considered as the reference. Sensitivities are interpreted using the diameters described in CA-
159 SFM 2019 V1.

160 Inconsistency in the interpretation for the comparison MH vs MHR :

161 For each bacterium and each antibiotic we compared the concordance of interpretation
162 between the two methods. Sensitive = S, intermediate = I or resistant = R. In case of
163 inconsistencies a MIC is determined by the Etest strip technique (BioMérieux).

164 The inconsistencies were classified according to the following interpretation criteria:

165 - minor error (me): antibiotics interpreted S or I with one method and respectively I or R with
166 the other method.

167 - Major Error (ME): antibiotics interpreted R with the MHR-SIR and S with the standard method.

168 - Very Major Error/Very Major Error (VME): antibiotics interpreted S with the MHR and R with
169 the standard MH.

170 Estimation of the reduction in turnaround time of the antibiogram by using live MHR from
171 positive blood culture bottles.

172 We have listed the turnover times necessary to obtain antibiograms with a single-center study
173 between July 1, 2017 and October 31, 2017 on all blood cultures from patients over 18 years
174 of age with mono-microbial enterobacteria bacteremia. Data on bacterial identification,
175 bacterial identification time and antibiogram turnaround time were extracted from the
176 Laboratory Information System (LIS).

177 A senior microbiologist and a mobile infectious disease team are available from 8:30AM to
178 6:30PM. The Senior microbiologist reads the antibiogram from 8:30AM to 5:00PM.

179 When a blood culture is positive the estimated time for maldi-tof identification and antibiotic
180 susceptibility testing is 1.5 hours. This time was calculated over a period of 4 months by
181 averaging the time required to obtain a direct bacterial identification from a blood culture
182 bottle and the time required to perform the antibiogram. The average time required to
183 incubate a Mueller-Hinton agar was 16 hours during our study. A delay of 17.5 hours is
184 therefore necessary to read an antibiogram from a positive blood culture bottle.

185 With the MH medium, blood cultures which turn out positive after 11:30PM (D0) and up to
186 3PM (D1) will have an antibiogram that is read and validated by a microbiologist starting at
187 8:30AM (D2). Positive blood cultures from 3PM (D1) to 11:30PM (D1) will have an antibiogram

that is read and validated by the microbiologist at the end of incubation between 8:30AM (D2) and 5PM (D2) (Fig.1).

The average time required for a reading of the MHR medium by the automated device was, during our study, of 7 hours. 8.5 hours were therefore necessary to read the antibiogram performed from a positive blood culture. This time is composed of the average incubation time (7 hours) and 1.5 hours to perform the bacterial identification with inoculation of the medium.

With the MHR medium, the blood cultures which turn out positive between 3PM (D1) and 12:00AM of (D2) will have an antibiogram that is theoretically read and validated by a microbiologist at 8:30AM (D2). Blood cultures which turn out positive between 12:00AM (D2) to 8:30AM (D2) will have an antibiogram that is read and validated by the microbiologist at the end of incubation between 8:30AM (D2) and 5PM (D2). Blood cultures which turn out positive between 8:30AM (D1) and 3PM (D1) will have no benefit (on the time to obtain the antibiogram) in being inoculated on MHR medium (Fig.1).

The MHR therefore saves time for positive blood cultures between 3PM on D1 and 8:30AM on D2 (Fig.1).

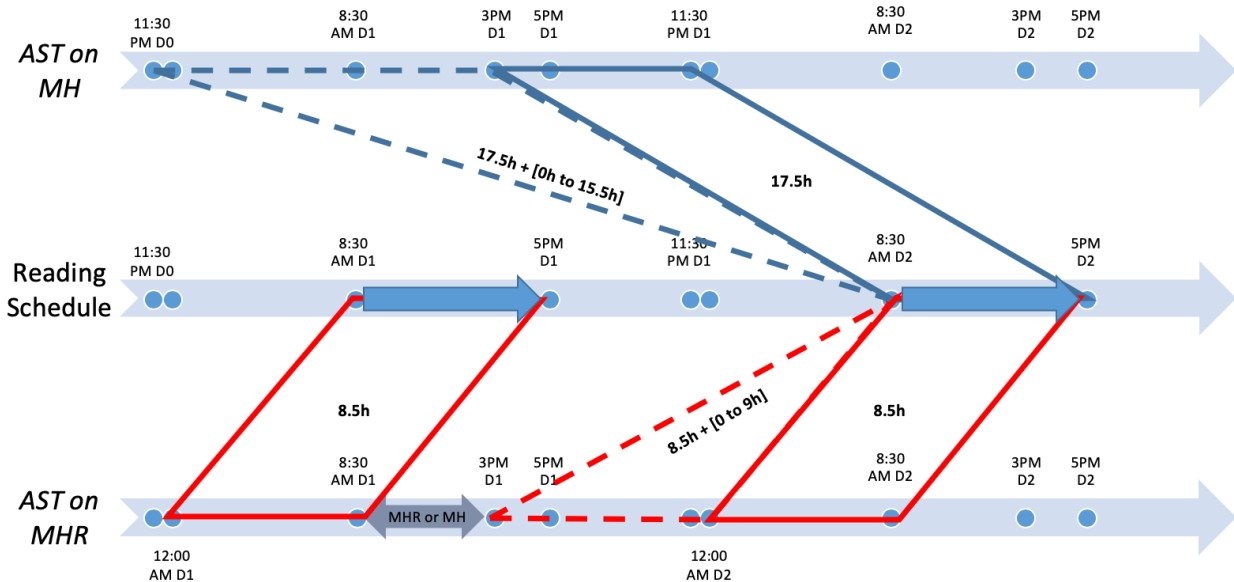


Fig.1: Theoretical reading time of the MH and MHR antibiograms as a function of blood culture positivity schedules. Representation of 3 scales, with the upper scale representing the hours of positivity of the blood cultures with the delay of 17.5 hours to 33 hours to obtain a direct

207 antibiogram on MH agar. The middle scale represents the time ranges for reading the
208 antibiograms (8:30AM to 5PM). The lower scale represents the hours of positivity of the blood
209 culture bottles with a delay of 8.5 hours to 17.5 hours to obtain a direct antibiogram from a
210 positive blood culture bottle, positive blood cultures between 8:30AM and 3PM can be
211 inoculated in MH or MHR with no impact on the time to obtain the antibiogram. D0 = Days 0,
212 D1 = Days 1 and D2 = Days 2.

213 We then estimated the time that could be saved on the turnover time of the antibiogram
214 provided by the MHR compared to the MH medium from the data extracted from our LIS.

215 Statistical analysis :

216 In order to identify diameter differences for the comparison of the CA-SFM or BSAC
217 recommendations we used a parametric test, the T-test (comparison of means). The search for
218 a significant difference in the number of discrepancies was performed in a test of χ^2 using
219 Minitab® version 19.2020.1.0. The result was significant if the $p < 0.05$. The graphics were
220 created with Rstudio® version 1.3.959 and R® 4.0.1.

Results

Comparison of BSAC vs. CA-SFM on MHR agar after inoculation of blood culture bottles.

Of the 1000 inhibition diameters studied in the repeatability study we had 79 diameters outside the acceptable diameter limits described in CA-SFM 2019 V1 for *E. coli* strain ATCC 25922. With 20 out of bounds diameters for the MHR according to the 1D inoculum recommendations (BSAC) and 59 for the MHR according to the 15D inoculum recommendations (CA-SFM). The differences are significant with $p < 0.001$ (chi2). Out-of-limit diameters were listed for ceftazidime, cefepime, imipenem and meropenem, quinolones and trimethoprim-sulfamethoxazole. (Fig.2)

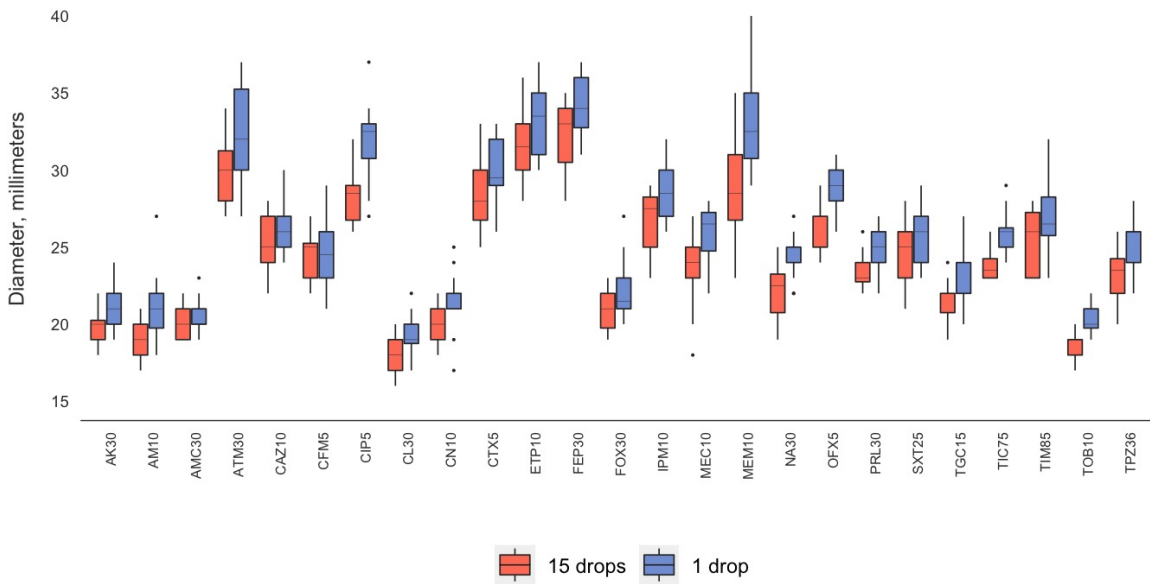


Fig.2: Comparison of diameters obtained during repeatability. 1 drop for the BSAC recommendations and 15 drops for the CA-SFM recommendations. The boxplot shows the 25th and 75th percentile with a horizontal bar indicating the median. Whiskers represent the 5th and 95th percentile. Extreme values are shown with dots. AM10 = Amoxicillin 10 µg, AMC30 = Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg, TIC75 = Ticarcillin 75 µg, TIM85 = Ticarcillin-clavulanic acid 85 µg, PRL30 = Piperacillin 30 µg, TPZ36 = Piperacillin-tazobactam 36 µg, MEC10 = Mecillinam 10 µg, LC30 = Cefalexin 30 µg, FOX30 = Ceftazidime 10 µg, FEP30 = Cefepime 30 µg, ATM30 = Aztreonam 30 µg, ETP10 = Ertapenem 10 µg, IPM10 = Imipenem 10 µg, MEM10 = Meropenem 10 µg, CN10 = Gentamicin 10 µg, AK30 = Amikacin 30 µg, TOB10 = Tobramycin 10 µg, NA30 = Nalidixic acid 30 µg, OFX5 = Ofloxacin 5 µg, CIP5 = Ciprofloxacin 5 µg, SXT25 = Trimethoprim + sulfamethoxazole 25 µg, TGC15 = Tigecycline 15 µg.

Of the 1700 diameters studied in the reproducibility study, 145 diameters were outside the acceptable diameter limits described in CA-SFM 2019 V1 for *E. coli* strain ATCC 25922. With 56 out of bounds diameters for the MHR according to the 1D inoculum recommendations (BSAC) and 91 for the MHR according to the 15D inoculum recommendations (CA-SFM). These differences are significant with $p = 0.003$. The antibiotics affected were amoxicillin, cefoxitin, cefixime, cefepime, meropenem, quinolones and trimethoprim-sulfamethoxazole. (Fig.3)

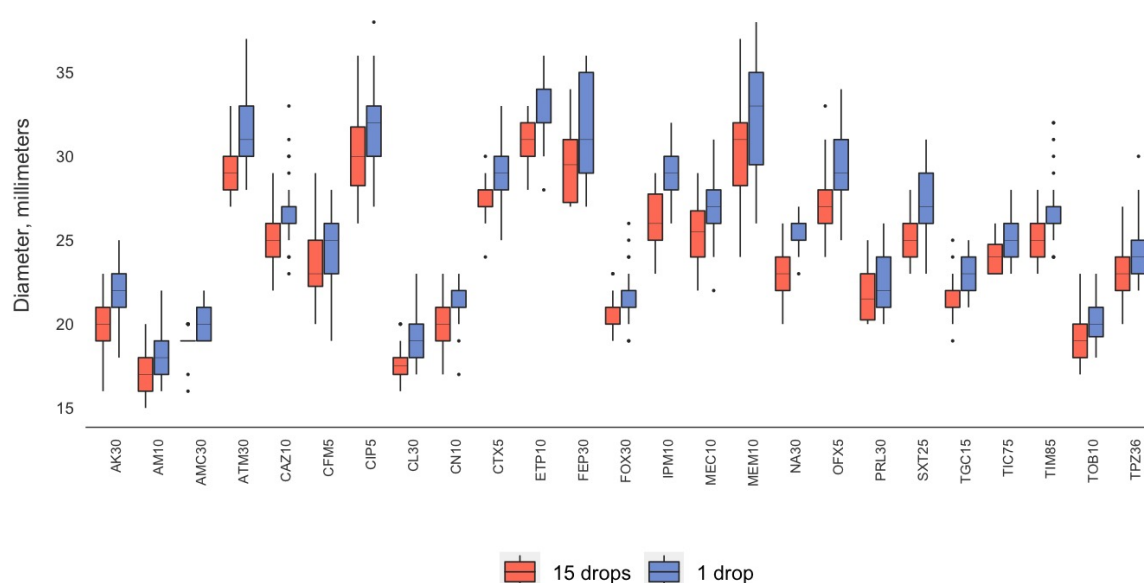


Fig.3: Comparison of diameters during reproducibility. 1 drop for BSAC recommendations and 15 drops for CA-SFM recommendations. The boxplot shows the 25th and 75th percentile with a horizontal bar indicating the median. Whiskers represent the 5th and 95th percentile.

Extreme values are shown with dots. AM10 = Amoxicillin 10 µg, AMC30 = Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg, TIC75 = Ticarcillin 75 µg, TIM85 = Ticarcillin-clavulanic acid 85 µg, PRL30 = Piperacillin 30 µg, TPZ36 = Piperacillin-tazobactam 36 µg, MEC10 = Mecillinam 10 µg, LC30 = Cefalexin 30 µg, FOX30 = Cefoxitin 30 µg, CFM5 = Cefixime 5 µg, CTX5 = Cefotaxime 5 µg, CAZ10 = Ceftazidime 10 µg, FEP30 = Cefepime 30 µg, ATM30 = Aztreonam 30 µg, ETP10 = Ertapenem 10 µg, IPM10 = Imipenem 10 µg, MEM10 = Meropenem 10 µg, CN10 = Gentamicin 10 µg, AK30 = Amikacin 30 µg, TOB10 = Tobramycin 10 µg, NA30 = Nalidixic acid 30 µg, OFX5 = Ofloxacin 5 µg, CIP5 = Ciprofloxacin 5 µg, SXT25 = Trimethoprim + sulfamethoxazole 25 µg, TGC15 = Tigecycline 15 µg.

The number of diameters outside the acceptable limits were grouped between repeatability and reproducibility in order to increase the size of the effectives per antibiotic and to identify the antibiotics that were most significantly affected. No significant differences were observed

for amoxicillin, ceftazidime, cefixime, cefepime, imipenem, meropenem. A significant difference was observed for the quinolones (Nalidixic Acid, Ofloxacin and Ciprofloxacin) (Table 1).

Table 1: Comparison of the number of diameters outside the defined limits for E. coli strain ATCC 25922 as a function of 1 drop (BSAC) and 15 drop (CA-SFM) inoculation conditions on the MHR medium.

Antibiotic (n=54)	Value out of acceptable limits with 1 drop	Value out of acceptable limits with 15 drop	p
Amoxicillin	6	10	NS*
Ceftazidime	22	41	NS
Cefixime	6	2	NS
Cefepime	11	22	NS
Imipenem	1	4	NS
Meropenem	12	10	NS
Nalidixic acid	1	8	0,026
Ofloxacin	13	38	0,04
Ciprofloxacin	2	13	0,008
Trimethoprim-sulfamethoxazole	2	2	NS
Total	76	150	

*= not significant. 1 drop for the BSAC recommendations and 15 drops for the CA-SFM recommendations

A comparison of reading diameters between the 1D and 15D recommendations was carried out by comparing averages. For repeatability a statistically significant difference was observed for all antibiotics with the exception of Amoxicillin-Clavulanic acid, Ticarcillin-Clavulanic acid, Cefixime, Ceftazidime, Gentamicin and Trimethoprim + Sulfamethoxazole. For reproducibility a statistically significant difference was observed for all antibiotics except amoxicillin, piperacillin, mecillinam, meropenem, gentamicin and ofloxacin.

For the use of the MHR, the results obtained by following the BSAC recommendations show fewer diameters outside the acceptable limits compared to the recommendations of the CA-SFM.

MHR vs. MH comparison on positive blood cultures

71 vials of positive monomicrobial blood cultures were collected during the study period from patients with sepsis. The bacteria identified were: *E. coli* (n=36), *K. pneumoniae* (n=15), *E. cloacae* (n=6), *P. mirabilis* (n=5), *S. marcescens* (n=4), *E. aerogenes* (n=2), *K. oxytoca* (n=2), *M. morganii* (n=1). The strains had a wild-type beta-lactam resistance profile for 46 of them, 15 had penicillinase, 1 had a hyperproduced cephalosporinase, 1 had an acquired cephalosporinase and 8 had ESBL (Table 2).

Table 2: List of the different bacterial species in the study with their resistance profiles to beta-lactam antibiotics.

Identification	Number	Beta-lactamin profile
<i>Escherichia coli</i>	36	17 Wild Type
		2 Inhibitor-resistant TEM
		4 High level penicillinase
		8 Penicillinase
		1 Plasmid cephalosporinase
		4 Extended spectrum beta-lactamase producing enterobacteriaceae (ESBL)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	15	12 Wild Type 3 ESBL
<i>Enterobacter cloacae</i>	6	5 Wild Type 1 ESBL
<i>Proteus mirabilis</i>	5	4 Wild Type 1 Penicillinase
<i>Serratia marcescens</i>	4	3 Wild Type 1 Hyperproduction of the chromosomal cephalosporinase (AmpC)
<i>Enterobacter aerogenes</i>	2	2 Wild Type
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	2 Wild Type
<i>Morganella morganii</i>	1	1 Wild Type

These 71 vials of blood cultures allowed us to test 1775 combinations (25 antibiotics x 71). On these combinations we had 7 mistakes. 1 minor error for trimethoprim-sulfamethoxazole, 5 Major Error for quinolones (4 Major Error for ciprofloxacin and 1 for ofloxacin) and 1 Very Major Error for trimethoprim-sulfamethoxazole (Table 3). These discrepancies were confirmed in the E-test.

The MHR medium thus shows 99.6% concordance with the MH medium. These results therefore showed an excellent clinical categorization correlation between MHR-SIR diameters and the standard method.

Table 3: Errors in the categorization of antibiotics of the MHR versus the MH medium

Species	Mistake		
	MHR Minor	MHR Major	MHR VME
<i>Escherichia coli</i>	Trimethoprim-sulfamethoxazole		
<i>Serratia marcescens</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ciprofloxacin	
<i>Escherichia coli</i>		Ofloxacin	
<i>Klebsiella pneumoniae</i>			Trimethoprim-sulfamethoxazole

Since the reading of MHR antibiograms is always performed using the SIR-scan interface, we report a difficult visualization of ESBL synergies with the MH medium due to the fine growth frequently found on MHR agar (Fig.4). Out of the 8 ESBL, there was only one ESBL where we did not manage to visualize the synergies.


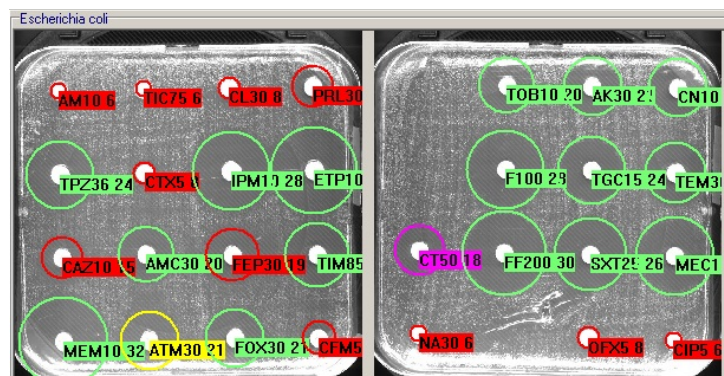


Fig.4: E. coli ESBL on MHR medium with a 7-hour reading from a blood culture bottle.

Estimated reduction in antibiotic susceptibility testing turnaround time by using direct MHR from positive blood cultures.

During the period of July 1, 2017 to October 31, 2017 we had 161 positive blood cultures with monobacterial enterobacteria. 121 blood cultures were positive between 3PM and 8:30AM. 43 between 3 PM and 00:00 and 78 between 00:00 and 8:30AM (Fig.5).

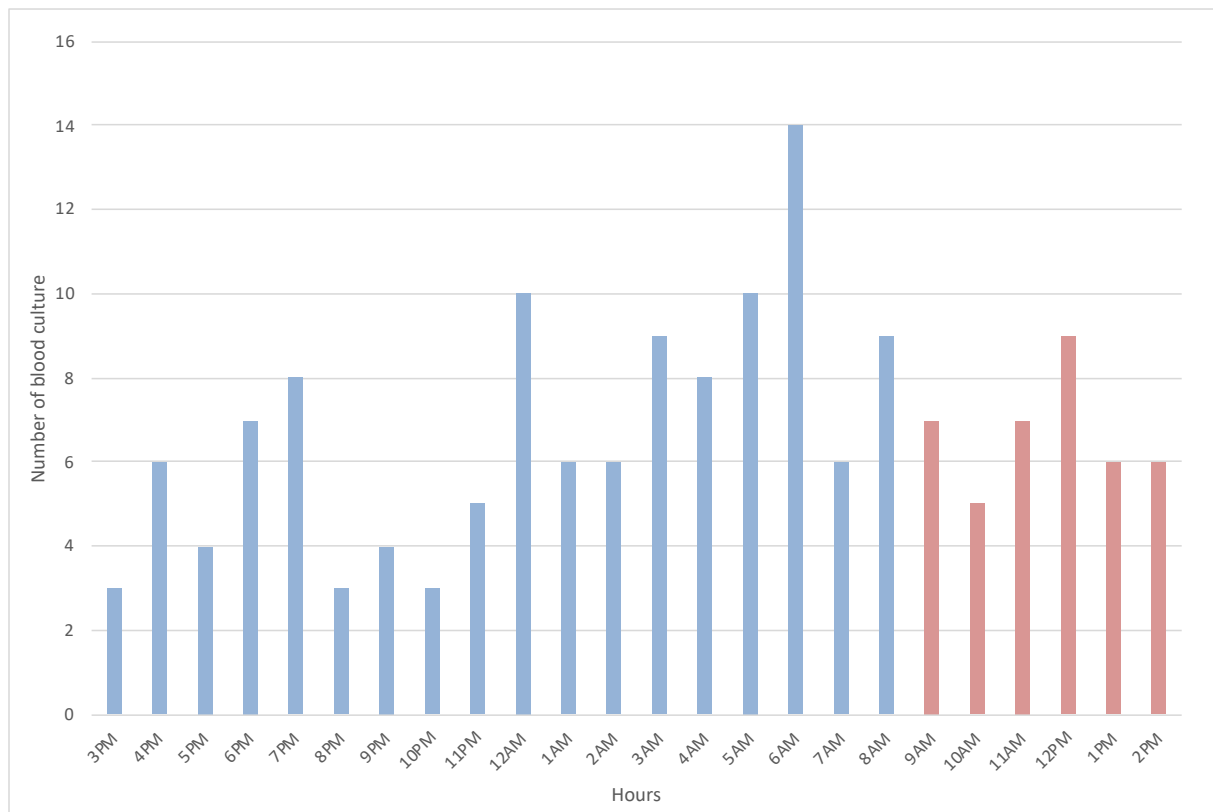


310

311 Fig.5: Distribution of the number of positive blood cultures as a function of time of the day. In
 312 blue are the blood cultures that can benefit from a reduction in delay in case of reduction of
 313 the MHR and in red are the blood cultures that do not.

314 The MHR system allows the antibiogram to have a turnover time of 8.5 hours for all positive
 315 blood cultures between 00:00 and 8:30AM, i.e. 48.5% of the blood cultures in our study
 316 (78/161) and in less than 17.5 hours for all positive blood cultures between 3PM and 00:00, i.e.
 317 26.7% of the blood cultures in our study (43/161). The MHR allows a time reduction for 75.1%
 318 of all blood cultures.

319 The average time required for the final rendering of the antibiogram with the MH medium is
 320 27 hours with a minimum time of 17 hours and 30 minutes and a maximum time of 36 hours
 321 and 30 minutes. For the theoretical use of the MHR the average time is 10 hours and 50 minutes
 322 with a minimum time to obtain a validated antibiogram of 8 hours and 30 minutes and a
 323 maximum time of 23 hours and 52 minutes (Fig. 6). On the average we have a 16-hour reduction
 324 in the turnover time to get an antibiogram.

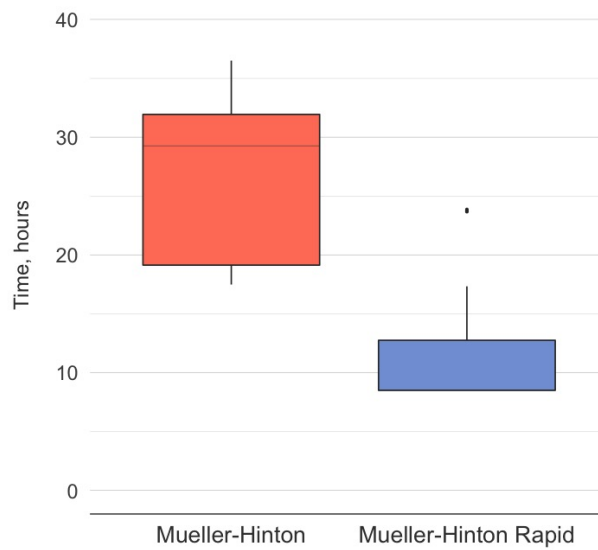

325

326 Fig.6: Time required to obtain the direct antibiogram from a blood culture vial for the MHR
327 and for the MH. Boxplots show the 25th and 75th percentile with the horizontal bar showing
328 the median. Whiskers show the 5th and 95th percentile. The outliers are represented by dots.

Discussion

In this work we have shown that the MHR was comparable to the standard method with the benefit of a shortened incubation period of 7 hours +/- 30 minutes. This agar thus allows a significant reduction in the incubation time of the antibiogram with an excellent concordance with the method routinely performed in the laboratory. This result confirms the study that was already carried out on the blood culture bottles¹⁶. This medium is therefore in addition to the current techniques for rapid phenotypic identification from a positive blood culture vial⁹ with low cost, good reproducibility and a simple adaptation within the laboratory workflow.

For the first time on the MHR medium we compared the inoculum recommendations of the BSAC¹⁴ vs CA-SFM¹⁵ with less disagreement in favor of the inoculum proposed by BSAC. Several methods are described to inoculate an antibiogram directly from a positive blood culture, but there is currently no consensus on any of them¹⁷⁻¹⁹. Studies seeking to standardize inoculum recommendations have failed to find the perfect inoculum²⁰. The recommendations are therefore often national. Our result is in favour of using the MHR medium following the BSAC recommendations despite the incrementation in the EUCAST of the ATU which is supposed to absorb variations due to a difference in inoculum²¹. The ATU relates to areas of technical uncertainty. The aim is to minimise systemic and random variation so as to not compromise the reproducibility of the tests.

Here, two sources of variation can explain the difference observed between the CA-SFM and BSAC recommendations. Firstly, the CA-SFM diameter was significantly reduced for the majority of antibiotics, related to the use of a larger initial inoculum. Second, the use of two different mediums to dilute the blood culture, saline for CA-SFM and sterile water for BSAC may have an impact on the bacterial culture as shown in an earlier study²².

Direct identification of blood cultures and performing antibiotic susceptibility testing 24/7²³, associated with the reading of antibiograms from 8:30AM to 5:00PM. are technical and organizational adaptations that allow a faster rendering of the antibiogram. Direct identification from a positive blood culture bottle allows a gain of 12 to 24 hours compared to identification by bacterial culture⁹. In addition to this time saving, the 24/7 opening allows a

358 reduction of 3.4 hours from venous sampling to incubation in the automated device and 10.4
359 hours on the adaptation of the antibiotic therapy²⁴.

360 The average time saved from the MHR compared to the standard method was 16 hours as
361 shown in the recent study of the MHR medium¹³. At the Nice University Hospital, the direct
362 identification of 96%¹⁰ of enterobacteria from blood culture vials, coupled with a rendering of
363 the majority of antibiograms in less than 8.5 hours, would make it possible to reduce the length
364 of hospitalisation³, complications and hospital mortality².

365 The mobile infectiology team available from 8:30AM to 6:30PM allows it to be possible to make
366 the link between the rapid rendering of resistance phenotypes and the adaptation of antibiotic
367 therapy for the patient²⁵.

368 Thanks to the implementation of the MHR we will allow a gain in the turnover time of the
369 antibiogram for 75.1% of blood cultures with an average theoretical gain of 16 hours. This gain
370 is to be reviewed according to human factors and the organization of work in our laboratory.
371 Indeed, the MHR workflow should allow biological validation as soon as the MHR is available
372 (between 8:30AM and 5PM) but a delay linked to the availability of the microbiologist may exist.
373 We bring here a precise explanation of the integration of this environment within a hospital
374 microbiology laboratory, which was not achieved in the previous study.

375 The integration of the MHR environment within the laboratory workflow must comply with the
376 criteria of the ISO 15189 standard.

377 The reading of the medium is performed by the SIR-scan computer interface (I2a), so there is
378 no longer the possibility to use the calliper as an aid in case of difficulty to read diameters.
379 Reading difficulty can therefore be observed when the image acquisition conditions are poor
380 or when the boundaries between the inhibition zone and the push zone are poorly defined.

381 We add that synergistic ESBL images often proved difficult to interpret (Fig.4), so ESBL detection
382 was done with the help of a decisional algorithm on the resistance phenotype. Confirmation of
383 an ESBL was based on the presence of a <6mm diameter for ticarcillin associated with a
384 cefoxitin sensitive for Group 1 and 2 enterobacteria when there was no co-resistance. If there
385 was any doubt for Group 3 enterobacteria, MH agar with cloxacillin was performed with disc
386 approximation.

We found a uniform fine growth throughout the agar, quite frequently, but without preventing the reading of the antibiograms. However, the MHR medium showed excellent agreement with the MH medium and allowed a shortening of the antibiogram turnover time. Moreover, this phenotypic method allows the study of the sensitivity to 25 antibiotics and the detection of cephalosporinase derepressions⁹.

Recently EUCAST has published specific diameters depending on incubation time and species for a reading on standard MH after 4, 6- or 8-hours incubation. For the development of this method EUCAST recommends taking 125µl from the blood culture bottle to be deposited directly on the agar and to incubate the plates for a maximum of 8 hours. The multiplication of reading diameters according to incubation time and species may compromise the use in microbiology laboratories. The integration of the MHR within the workflow will be easier and less constraining.

However, our study has several limitations. We have a small number of blood cultures on which direct MHR medium has been performed and our study is monocentric. Our bacterial sample represents a classic laboratory epidemiology and therefore has a low amount of ESBL bacteria and an absence of carbapenemase. A strain collection with carbapenemase and ESBL would allow further exploration of the limitations of the image acquisition system (SIR-scan). This study provides a reduction in theoretical delay that would need to be confirmed under the conditions of use of the MHR medium. The evaluation of the number of errors was not made on the number of resistant bacteria but on the total number of antibiotics tested.²⁶.

409 **Conclusion and outlook**

410

411 Our results showed an excellent correlation between the two methods MH and MHR-SIR. This
412 method allows a rapid phenotypic identification, which was until now impossible.

413 The clinical microbiology laboratory of the Nice University Hospital is currently working on the
414 development of a strong cooperation with the infectiology department which will allow an
415 early adaptation of the antibiogram. Associated with this cooperation, an antibiotic advice will
416 be directly integrated into the antibiotic susceptibility test in order to encourage clinicians to
417 adapt antibiotic therapy, particularly in patients with sepsis.

Bibliography

1. Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. *Crit Care Med.* 2001;29(7):1303-1310. doi:10.1097/00003246-200107000-00002
2. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med.* 2001;345(19):1368-1377. doi:10.1056/NEJMoa010307
3. Shorr AF, Micek ST, Welch EC, Doherty JA, Reichley RM, Kollef MH. Inappropriate antibiotic therapy in Gram-negative sepsis increases hospital length of stay. *Crit Care Med.* 2011;39(1):46-51. doi:10.1097/CCM.0b013e3181fa41a7
4. Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. *Chest.* 1999;115(2):462-474. doi:10.1378/chest.115.2.462
5. Schwaber MJ, Navon-Venezia S, Kaye KS, Ben-Ami R, Schwartz D, Carmeli Y. Clinical and Economic Impact of Bacteremia with Extended- Spectrum- β -Lactamase-Producing Enterobacteriaceae. *Antimicrob Agents Chemother.* 2006;50(4):1257-1262. doi:10.1128/AAC.50.4.1257-1262.2006
6. Galar A, Leiva J, Espinosa M, Guillén-Grima F, Hernández S, Yuste JR. Clinical and economic evaluation of the impact of rapid microbiological diagnostic testing. *Journal of Infection.* 2012;65(4):302-309. doi:10.1016/j.jinf.2012.06.006
7. de Kraker MEA, Jarlier V, Monen JCM, Heuer OE, van de Sande N, Grundmann H. The changing epidemiology of bacteraemias in Europe: trends from the European Antimicrobial Resistance Surveillance System. *Clin Microbiol Infect.* 2013;19(9):860-868. doi:10.1111/1469-0691.12028
8. Impact de l'ouverture du laboratoire de bactériologie 24h/24 sur la prise en charge des bactériémies, faculté de médecine de nice, 2018.
9. Dubourg G, Lamy B, Ruimy R. Rapid phenotypic methods to improve the diagnosis of bacterial bloodstream infections: meeting the challenge to reduce the time to result. *Clin Microbiol Infect.* 2018;24(9):935-943. doi:10.1016/j.cmi.2018.03.031
10. Simon L, Ughetto E, Gaudart A, Degand N, Lotte R, Ruimy R. Direct Identification of 80 Percent of Bacteria from Blood Culture Bottles by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry Using a 10-Minute Extraction Protocol. *J Clin Microbiol.* 2019;57(2). doi:10.1128/JCM.01278-18
11. Vlek ALM, Bonten MJM, Boel CHE. Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia. *PLoS One.* 2012;7(3). doi:10.1371/journal.pone.0032589
12. Huang T-D, Melnik E, Bogaerts P, Evrard S, Glupczynski Y. Evaluation of the ePlex Blood Culture Identification Panels for Detection of Pathogens in Bloodstream Infections. *J Clin Microbiol.* 2019;57(2). doi:10.1128/JCM.01597-18
13. Pilmis B, Thy M, Diep J, et al. Clinical impact of rapid susceptibility testing on MHR-SIR

457 directly from blood cultures. *J Antimicrob Chemother*. Published online August 3, 2019.
 458 doi:10.1093/jac/dkz271

459 14. British society for antimicrobial chemotherapy, Version 12 May 2013. [http://bsac.org.uk/wp-](http://bsac.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/Version-12-Apr-2013_final.pdf)
 460 [content/uploads/2012/02/Version-12-Apr-2013_final.pdf](http://bsac.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/Version-12-Apr-2013_final.pdf)

461 15. CA-SFM / EUCAST 2019. [https://www.sfm-microbiologie.org/wp-](https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2019/02/CASFM2019_V1.0.pdf)
 462 [content/uploads/2019/02/CASFM2019_V1.0.pdf](https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2019/02/CASFM2019_V1.0.pdf)

463 16. Périllaud-Dubois C, Pilimis B, Diep J, et al. Performance of rapid antimicrobial susceptibility
 464 testing by disk diffusion on MHR-SIR agar directly on urine specimens. *Eur J Clin Microbiol Infect*
 465 *Dis*. 2019;38(1):185-189. doi:10.1007/s10096-018-3413-5

466 17. Coyle MB, McGonagle LA, Plorde JJ, Clausen CR, Schoenknecht FD. Rapid antimicrobial
 467 susceptibility testing of isolates from blood cultures by direct inoculation and early reading of disk
 468 diffusion tests. *J Clin Microbiol*. 1984;20(3):473-477.

469 18. Doern GV, Scott DR, Rashad AL, Kim KS. Evaluation of a direct blood culture disk diffusion
 470 antimicrobial susceptibility test. *Antimicrob Agents Chemother*. 1981;20(5):696-698.

471 19. Wegner DL, Mathis CR, Neblett TR. Direct Method to Determine the Antibiotic Susceptibility
 472 of Rapidly Growing Blood Pathogens. *Antimicrob Agents Chemother*. 1976;9(5):861-862.

473 20. Fay D, Oldfather JE. Standardization of direct susceptibility test for blood cultures. *J Clin*
 474 *Microbiol*. 1979;9(3):347-350.

475 21. Jonasson E, Matuschek E, Kahlmeter G. The EUCAST rapid disc diffusion method for
 476 antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood culture bottles. *J Antimicrob*
 477 *Chemother*. 2020;75(4):968-978. doi:10.1093/jac/dkz548

478 22. Sherman JM, Holm GE, Albus WR. Salt Effects in Bacterial Growth. *J Bacteriol*.
 479 1922;7(6):583-588.

480 23. Eveillard M, Lemarié C, Cottin J, et al. Assessment of the usefulness of performing bacterial
 481 identification and antimicrobial susceptibility testing 24 h a day in a clinical microbiology laboratory.
 482 *Clinical Microbiology and Infection*. 2010;16(8):1084-1089. doi:10.1111/j.1469-0691.2009.03044.x

483 24. Chirio D, Ruimy R. The clinical impact of an around the clock processing of blood cultures.

484 25. Morency-Potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. Antimicrobial Stewardship: How the
 485 Microbiology Laboratory Can Right the Ship. *Clin Microbiol Rev*. 2017;30(1):381-407.
 486 doi:10.1128/CMR.00066-16

487 26. Jorgensen JH. Selection criteria for an antimicrobial susceptibility testing system. *Journal of*
 488 *Clinical Microbiology*. 1993;31(11):2841-2844. doi:10.1128/JCM.31.11.2841-2844.1993

489

490

Bibliographie

1. Lamy B, Dargère S, Arendrup MC, Parienti J-J, Tattevin P. How to Optimize the Use of Blood Cultures for the Diagnosis of Bloodstream Infections? A State-of-the Art. *Front Microbiol.* 2016;7. doi:10.3389/fmicb.2016.00697
2. Torio CM, Andrews RM. National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2011: Statistical Brief #160. In: *Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs*. Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2006. Accessed May 9, 2020. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK169005/>
3. Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. *Crit Care Med.* 2001;29(7):1303-1310. doi:10.1097/00003246-200107000-00002
4. Gaieski DF, Edwards JM, Kallan MJ, Carr BG. Benchmarking the incidence and mortality of severe sepsis in the United States. *Crit Care Med.* 2013;41(5):1167-1174. doi:10.1097/CCM.0b013e31827c09f8
5. Iwashyna TJ, Cooke CR, Wunsch H, Kahn JM. The Population Burden of Long-Term Survivorship after Severe Sepsis Among Older Americans. *J Am Geriatr Soc.* 2012;60(6):1070-1077. doi:10.1111/j.1532-5415.2012.03989.x
6. Rhee C, Gohil S, Klompas M. Regulatory Mandates for Sepsis Care — Reasons for Caution. *N Engl J Med.* 2014;370(18):1673-1676. doi:10.1056/NEJMp1400276
7. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med.* 2013;41(2):580-637. doi:10.1097/CCM.0b013e31827e83af
8. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med.* 2001;345(19):1368-1377. doi:10.1056/NEJMoa010307
9. Liu VX, Fielding-Singh V, Greene JD, et al. The Timing of Early Antibiotics and Hospital Mortality in Sepsis. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;196(7):856-863. doi:10.1164/rccm.201609-1848OC
10. Impact de l'ouverture du laboratoire de bactériologie 24h/24 sur la prise en charge des bactériémies, faculté de médecine de nice, 2018.
11. Simon L, Ughetto E, Gaudart A, Degand N, Lotte R, Ruimy R. Direct Identification of 80 Percent of Bacteria from Blood Culture Bottles by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry Using a 10-Minute Extraction Protocol. *J Clin Microbiol.* 2019;57(2). doi:10.1128/JCM.01278-18
12. Shorr AF, Micek ST, Welch EC, Doherty JA, Reichley RM, Kollef MH. Inappropriate antibiotic therapy in Gram-negative sepsis increases hospital length of stay. *Crit Care Med.* 2011;39(1):46-51. doi:10.1097/CCM.0b013e3181fa41a7

13. Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. *Chest*. 1999;115(2):462-474. doi:10.1378/chest.115.2.462
14. Schwaber MJ, Navon-Venezia S, Kaye KS, Ben-Ami R, Schwartz D, Carmeli Y. Clinical and Economic Impact of Bacteremia with Extended- Spectrum- β -Lactamase-Producing Enterobacteriaceae. *Antimicrob Agents Chemother*. 2006;50(4):1257-1262. doi:10.1128/AAC.50.4.1257-1262.2006
15. Galar A, Leiva J, Espinosa M, Guillén-Grima F, Hernáez S, Yuste JR. Clinical and economic evaluation of the impact of rapid microbiological diagnostic testing. *Journal of Infection*. 2012;65(4):302-309. doi:10.1016/j.jinf.2012.06.006
16. de Kraker MEA, Jarlier V, Monen JCM, Heuer OE, van de Sande N, Grundmann H. The changing epidemiology of bacteraemias in Europe: trends from the European Antimicrobial Resistance Surveillance System. *Clin Microbiol Infect*. 2013;19(9):860-868. doi:10.1111/1469-0691.12028
17. Dubourg G, Lamy B, Ruimy R. Rapid phenotypic methods to improve the diagnosis of bacterial bloodstream infections: meeting the challenge to reduce the time to result. *Clin Microbiol Infect*. 2018;24(9):935-943. doi:10.1016/j.cmi.2018.03.031
18. Vlek ALM, Bonten MJM, Boel CHE. Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia. *PLoS One*. 2012;7(3). doi:10.1371/journal.pone.0032589
19. Huang T-D, Melnik E, Bogaerts P, Evrard S, Glupczynski Y. Evaluation of the ePlex Blood Culture Identification Panels for Detection of Pathogens in Bloodstream Infections. *J Clin Microbiol*. 2019;57(2). doi:10.1128/JCM.01597-18
20. Pilmis B, Thy M, Diep J, et al. Clinical impact of rapid susceptibility testing on MHR-SIR directly from blood cultures. *J Antimicrob Chemother*. Published online August 3, 2019. doi:10.1093/jac/dkz271
21. British society for antimicrobial chemotherapy, Version 12 May 2013. http://bsac.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/Version-12-Apr-2013_final.pdf
22. CA-SFM / EUCAST 2019. https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2019/02/CASFM2019_V1.0.pdf
23. Périllaud-Dubois C, Pilmis B, Diep J, et al. Performance of rapid antimicrobial susceptibility testing by disk diffusion on MHR-SIR agar directly on urine specimens. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2019;38(1):185-189. doi:10.1007/s10096-018-3413-5
24. Coyle MB, McGonagle LA, Plorde JJ, Clausen CR, Schoenknecht FD. Rapid antimicrobial susceptibility testing of isolates from blood cultures by direct inoculation and early reading of disk diffusion tests. *J Clin Microbiol*. 1984;20(3):473-477.
25. Doern GV, Scott DR, Rashad AL, Kim KS. Evaluation of a direct blood culture disk diffusion antimicrobial susceptibility test. *Antimicrob Agents Chemother*. 1981;20(5):696-698.
26. Wegner DL, Mathis CR, Neblett TR. Direct Method to Determine the Antibiotic Susceptibility

of Rapidly Growing Blood Pathogens. *Antimicrob Agents Chemother*. 1976;9(5):861-862.

27. Fay D, Oldfather JE. Standardization of direct susceptibility test for blood cultures. *J Clin Microbiol*. 1979;9(3):347-350.

28. Jonasson E, Matuschek E, Kahlmeter G. The EUCAST rapid disc diffusion method for antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood culture bottles. *J Antimicrob Chemother*. 2020;75(4):968-978. doi:10.1093/jac/dkz548

29. Sherman JM, Holm GE, Albus WR. Salt Effects in Bacterial Growth. *J Bacteriol*. 1922;7(6):583-588.

30. Eveillard M, Lemarié C, Cottin J, et al. Assessment of the usefulness of performing bacterial identification and antimicrobial susceptibility testing 24 h a day in a clinical microbiology laboratory. *Clinical Microbiology and Infection*. 2010;16(8):1084-1089. doi:10.1111/j.1469-0691.2009.03044.x

31. Chirio D, Ruimy R. The clinical impact of an around the clock processing of blood cultures.

32. Morency-Potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. Antimicrobial Stewardship: How the Microbiology Laboratory Can Right the Ship. *Clin Microbiol Rev*. 2017;30(1):381-407. doi:10.1128/CMR.00066-16

33. Jorgensen JH. Selection criteria for an antimicrobial susceptibility testing system. *Journal of Clinical Microbiology*. 1993;31(11):2841-2844. doi:10.1128/JCM.31.11.2841-2844.1993

SERMENT DE GALIEN

Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers de l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :

- ❖ D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.*
- ❖ D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement.*
- ❖ De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine, de respecter le secret professionnel.*
- ❖ En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.*

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y manque.
